

Hoito- ja sairaalakalusteet | 2017



SISÄLLYSLUETTELO

LOJER GROUP lyhyesti

5 LOJER SERVICE

6 HOITOSÄNGYT

ScanAfia XHS -hoitosänky

ScanAfia XL -hoitosänky

ScanAfia Pro -hoitosänky

Kokoontaittuva Modux-hoitosänky

16 SAIRAALASÄNGYT

ScanAfia XS -sairaalasänky

ScanAfia X ICU -sairaalasänky

Lisävarusteet sairaala- ja hoitosänkyihin

24 YÖPÖYDÄT

25 PATJAT

27 TUTKIMUS-, HOITO- JA TYÖTUOLIT

Capre RC -toipumistuoli

Capre MC -monitoimituoli

Geriatrinen tuoli

Hydraulinen hoitotuoli

Pyörivä tutkimus- ja toimenpidetuoli

Työtuolit ja jakkarat

34 SUIHKUKALUSTEET JA KULJETUS- JA ENSIAPUPAARIT

35 TUTKIMUS- JA GYNEKOLOGISET PÖYDÄT

Yleistutkimuspöytä 4040X

Gynekologinen yleistutkimuspöytä Afia 4050M

Gynekologinen tutkimustuoli Afia 4060

Yleistutkimuspöytä Capre E2

44 SAIRAALA- JA TARVIKEVAUNUT

51 NESTEENANTOTELINEET

52 POTILASVERHOT JA -SERMIT

54 LEIKKAUSPÖYDÄT JA LISÄVARUSTEET

59 TUTKIMUS-, TOIMENPIDE- JA LUKUVALAISIMET

61 LOJER SYMBOLIT

62 VERHOILUN VÄRIMALLIT





Eva Wahlström
Nyrkkeilyn
maailmanmestari



LOJER® For easy care

LOJER® For easy care

SUOMEN
VAHVIMMAT

2017

Lojer Oy

 asiakastieto.fi

Lojer on myös Pohjoismaiden suurin fysioterapialaitteiden ja -tarvikkeiden jälleenmyyjä. Tutustu verkkokauppaan osoitteessa shop.lojer.com

Omalla tuotannolla yli 100 maahan

Valmistus Suomessa

Lojer-tuotteiden teräsosat on tehty kotimaisesta raaka-aineesta. Yritys valmistaa komponentit omiin tuotteisiinsa, ja kaikki Lojer-tuotteet on valmistettu alusta loppuun Suomessa. Lojer-tuotteille onkin ainoana hoitokalusteiden valmistajana myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-tunnus.

Kestävä kehitys

Ympäristöasioiden huomioiminen on ollut osa Lojer Oy:n päivittäistä toimintaa jo vuosikymmenten ajan ja yhtiö on sitoutunut ympäristöasioiden jatkuvaan kehittämiseen. Kierätyksen korkeasta tasosta kertoo esimerkiksi alumiinijätteen 100 % kierrätys omassa valimossa. Kaikki Lojer-tuotteet valmistetaan käyttämällä sertifioitua, kokonaan uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä.

Lojer-tuotteet ovat CE-merkittyjä lääkinällisiä laitteita. Niiden tuotekehitys, testaus ja valmistus tapahtuu ISO9001- ja ISO13485-standardien mukaisesti. Myös Lojerin edustuksessa olevat tuotteet ovat testattuja. Useimmat tuotteet täyttävät MDD-vaatimukset ja ovat CE-merkittyjä terveydenhuollon laitteita.

HygTech Alliance

Lojer on mukana kotimaisessa HygTech-allianssissa, jonka yritykset tarjoavat yhdessä kokonaisvaltaisen valikoiman antimikrobisia ratkaisuja julkisiin tiloihin. Pystymme toteuttamaan kaikki kosketuspinnat antimikrobisina, vähentäen bakteerien kasvua ja leviämistä merkittävästi.

Elinkaaripalvelut

Lojerin elinkaaripalvelut toimivat joustavasti ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Niiden ansiosta hoitohenkilökunta voi keskittyä tärkeimpään: potilaiden ja hoidettavien hyvinvointiin. Palvelusopimus räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti: laajuus vaihtelee satunnaisiin huolto- tai korjaustarpeisiin vastaamisesta koko kalustekannan ulkoistamiseen ja kokonaisvaltaiseen ylläpitovastuuseen.

Elinkaari- ja varaosapalvelusta vastaa Lojer Service, jolla on yksiköt Sastamalassa, Tampereella, Orimattilassa, Espoossa ja Kempeleessä.

TOIMIVA VUODEPAIKKA -PALVELU

Lojerin Toimiva vuodepaikka -palvelu edustaa uudenlaista ajattelua: se takaa sairaalan tai hoitolaitoksen sairaalakalusteiden turvallisuuden ja toimintakuntoisuuden joka tilanteessa. Vastuu kalusteiden omistuksesta ja ylläpidosta on Lojerilla; saat toimivan hoitopaikan moderneilla sairaalakalusteilla, joita valmistaja hoitaa ja huoltaa säännöllisesti. Lojer voi ottaa vastuulleen myös asiakkaan vanhan laitekannan omistuksen ja ylläpidon.

VARAOSAT

Pitkän linjan toimijana Lojer-varaosilla on nopea saatavuus, ja kotimaisten tehtaiden ansiosta varaosia voidaan toimittaa jopa 20–30 vuotta vanhoihin laitteisiin. Saat yleisimmät varaosat toimitettuna Lojerin logistiikkakeskuksesta jopa seuraavaksi aamuksi.



Katso video
tehdasesittelystä:
<http://bit.ly/lojerfactory>



Lojer Service



Toimiva vuodepaikka –palvelu

Toimiva vuodepaikka -palvelussa vastuu kalusteiden omistuksesta ja ylläpidosta on Lojerilla. Sairaalan tai hoitolaitoksen sairaalakalusteet ovat näin ollen aina moderneja, turvallisia sekä huollettuja.



Huolenpitosopimukset

Huolenpitosopimus räätälöidään joustavasti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaiseksi. Niiden laajuus vaihtelee säännöllisistä ennakkohuolloista kokonaispalveluun, joka kattaa myös varaosat ja matkakustannukset.



Huolto- ja varaosapalvelut

Tarjoamme lakisääteistä vuosihuoltoa, korjauspalvelua ja varaosia asiakkaillemme ympäri Suomen. Ammattimaisella huollolla laitteet kestävät käytössä pitkään ja elinkaarikustannus laskee.



Easy Care System

Laki velvoittaa paitsi huoltamaan laitteita myös ylläpitämään rekisteriä laitteiden huollosta. Olemme kehittäneet uuden rekisterin, jonka avulla voidaan valvoa ja ylläpitää kalustoa reaaliaikaisesti tai tehdä huoltopyyntöjä.



Kierrätys

Huolehdimme myös käytöstä poistettavista hoitokalusteista merkistä riippumatta. Haemme laitteet, puramme ne ja huolehdimme kierrätyksestä. Palvelun saatavuus vaihtelee paikkakunnittain.



Vuokraus ja rahoitus

Leasing on joustava vaihtoehto organisaatioille, jotka eivät halua sitoa suuria pääomia. Sopimuksen kesto on yleensä 36 – 60 kk, ja se vaatii rahoitusyhtiön luottopäätöksen. Toisaalta myös lyhyet jopa yhden vuorokauden vuokra-ajat ovat mahdollisia.



Hoitosängyt



Lojer on ainoa hoivavuoteita Suomessa valmistava yritys

ScanAfia XHS -hoitosänky

Laadukas ScanAfia XHS- hoitosänky on terveydenhuollon ammattilaisen ykkösvalinta. Tuoteperheen uusin sänky on suunniteltu monenlaiseen hoitoympäristöön, jossa arvostetaan helppokäyttöisyyden ja luotettavuuden lisäksi muotoilua sekä ulkonäköä.

Sängyn erittäin laaja korkeudensäätöalue edistää potilaan turvallista kuntoutumista ja hyvinvointia sekä helpottaa hoitohenkilökunnan työtä.

*Saatavana uusilla moderneilla valkotammissilla
Scandic-päädyillä*



Kuvan tuote valkotammissilla Scandic-päädyillä
ja kaksoispyörillä (lisävarusteita)



Tärkeimmät ominaisuudet

- 1 Suuri kuormitettavuus (SWL) 260kg
- 2 Matala alakorkeus (alk. 32 cm) lisää potilaan omatoimisuutta ja turvallisuutta
- 3 Selkäosan liukumekanismi estää potilaan valumisen ja parantaa käyttömukavuutta


Tekniset ominaisuudet



Muut lisävarusteet

- Erikoispituinen (jatkettava) malli
- Törmäyspyörät (tehdasasenteinen)
- Kohottautumisteline
- Nousutuki
- Nesteenantoteline yhden käden pikasäädöllä
- Lukuvalaisin
- Kaiteen lisäkoroke
- Pehmustettu kaidesuoja
- Virtsapussiteline
- Luku- ja ruokailutaso sängyn laitojen päälle
- Sängyn lukituspaneeli (potilaalta voidaan estää toimintoja)
- Käsiohjainteline
- Patjakoko 78/88 x 205 x 13 cm
- Päädyt: Classic-pyökki, Classic-koivu ja Scandic-vaalea tammi (optio)

Mittakuvat

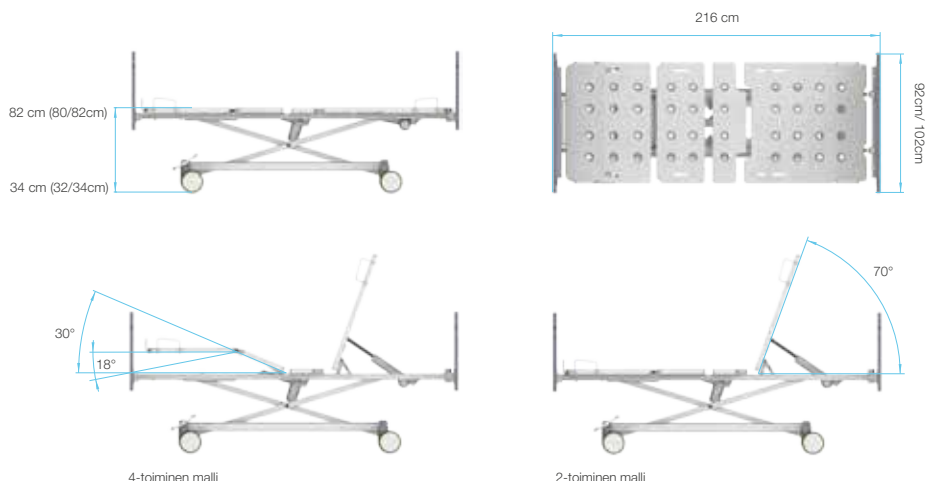

ScanAfia XL -hoitosänky

Erikoismittainen hoitosänky

ScanAfia XL -hoitosänky on suunniteltu isokokoisille potilaille tai käyttäjille, jotka arvostavat sängyssään leveyttä. ScanAfia XL -hoitosängyn makuutason leveys on 120cm ja suurin kuormitettavuus (SWL) 285kg. Suurten kaksoispyörien ansiosta sänky on helposti liikuteltava, mutta silti erittäin tukeva.


*Tyylikkyyttä ja tilaa arvostavalle
– ominaisuuksista tinkimättä*



Tärkeimmät ominaisuudet

- 1 Sängyn makutason leveys 120 cm tilaa ja turvallisuutta arvostavalle
- 2 Suuri kuormitettavuus (SWL) 285kg mahdollistaa myös suurikokoisten potilaiden hoidon
- 3 Laaja korkeudensäätöalue mahdollistaa potilaan omatoimisuuden ja helpottaa hoitajan ergonomiaa


Tekniset ominaisuudet

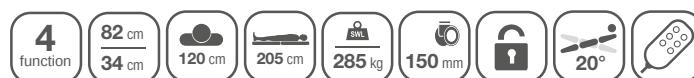

Muut lisävarusteet

- Kohottautumisteline
- Nousutuki
- Nesteenantoteline yhden käden pikasäädöllä
- Lukuvalaisin
- Kaiteen lisäkoroke
- Pehmustettu kaidesuoja
- Virtsapussiteline
- Törmäyspyörät (tehdasasenteinen)
- Sängyn lukituspaneeli (potilaalta voidaan estää toimintoja)
- Käsiohjainteline
- Patjakoko 118 x 205 x 13 cm
- Päädyt: Scandic-valkotammi

Mittakuvat

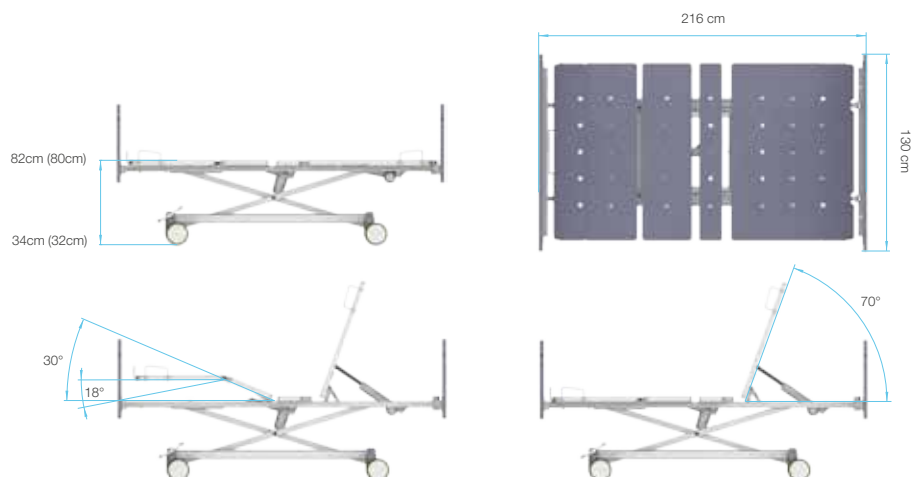

ScanAfia Pro -hoitosänky

Suomen myydyin hoitosänky

ScanAfia Pro -hoitosänky soveltuu monenlaisiin hoitoympäristöihin ja on lukuisten ammattilaisten valinta hoivakodeissa ympäri Suomen pitkän elinkaaren, luotettavuuden ja helppokäyttöisyyden ansiosta. Sängyn monipuoliset säädöt ja lisävarusteet edistävät potilaan turvallista kuntoutumista ja hyvinvointia sekä helpottavat hoitohenkilökunnan työtä.

1

*Pitkä käyttöikä – markkinoiden
alhaisimmat elinkaarikustannukset*



Kuvan tuote koivunvärisellä Classic-päädyllä

Tärkeimmät ominaisuudet

- 1 Suunniteltu kapeat oviaukot huomioiden
- 2 Massiivipuiset päädyt sekä irrotettava ja hyvin hengittävä ABS-muovipohja
- 3 Pitkä käyttöikä – markkinoiden alhaisimmat elinkaarikustannukset


Tekniset ominaisuudet



Muut lisävarusteet

- Erikoispituiset mallit
- Korotetut päädyt ja laidat (tehdasasenteinen)
- Törmäyspyörät (tehdasasenteinen)
- Kohottautumisteline
- Nousutuki
- Nesteenantoteline yhden käden pikasäädöllä
- Lukuvalaisin
- Pehmustettu kaidesuoja
- Virtsapussiteline
- Luku- ja ruokailutaso sängyn laitojen päälle
- Sängyn lukituspaneeli (potilaalta voidaan estää toimintoja)
- Käsiohjainteline
- Patjakoko 78/88 x 205 x 13 cm
- Päädyt: Classic-pyökki ja Classic-koivu

Mittakuvat

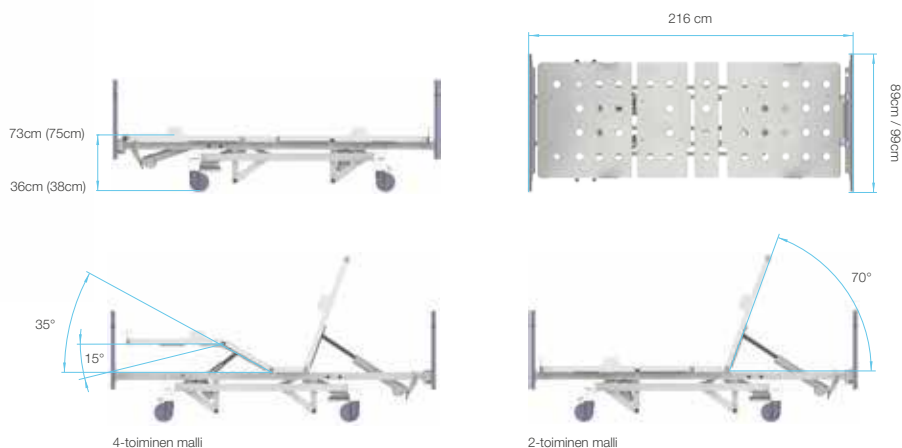

Modux-hoitosänky

Huippusuositettu kokoontaittuva hoitosänky

Patentoitu Modux-hoitosänky taittuu nopeasti kuljetus- ja säilytysasentoon sähköisesti nappia painamalla. Modux soveltuu täydellisesti erityisesti apuvälineyksiköiden kotihoitosängyksi tai joustavaksi hoivakotien ratkaisuksi. Kokoontaitettavuudesta huolimatta Modux-sängyssä on täysin samat ominaisuudet kuin muissakin hoitosängyissä erittäin alhaisella alakorkeudella. Lisäksi Modux-sängyn saa säädettyä rantatuolimaiseen mukavuusasentoon.

Joustava ratkaisu lyhyt- ja pitkäaikaisiin tarpeisiin



Käyttökuntoon parissa minuutissa ilman työkaluja.



Katso video:
<http://bit.ly/moduxvuode>

Tärkeimmät ominaisuudet

- 1 Varastoinnin tilatarve on pieni (kuljetus- ja säilytysasento 60cm x 90/100cm)
- 2 Sähköisesti kokoonlaitettava nappia painamalla ilman työkaluja
- 3 Saatavilla sekä 80cm että 90cm leveänä


Tekniset ominaisuudet



Muut lisävarusteet

- Kohottautumisteline
- Nousutuki
- Nesteenantoteline yhden käden pikasäädöllä
- Pehmustettu kaidesuoja
- Luku- ja ruokailutaso sängyn laitojen päälle
- Lukuvalaisin
- Patjakoko 78/88 x 205 x 13 cm

Mittakuvat

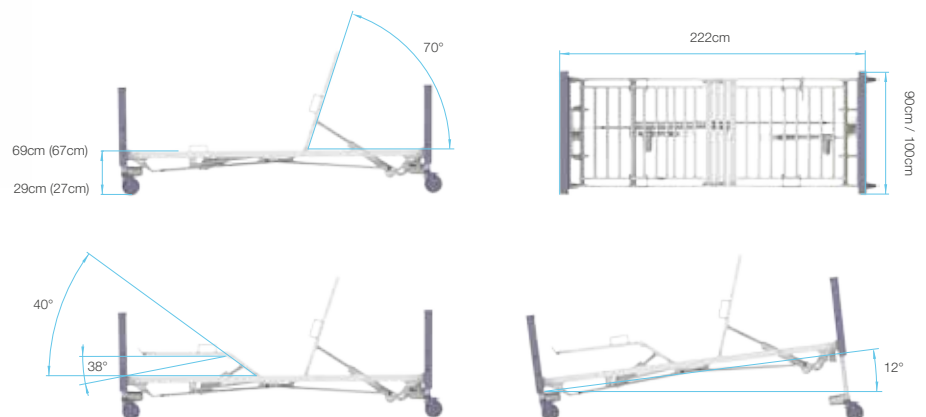

Sairaalasängyt





ScanAfia XS -sairaalasänky

Varma valinta vuodeosastoille

ScanAfia XS -sairaalasänky on vuodeosastojen turvallinen valinta. Patentoitu sairaalasänky on suunniteltu terveydenhuollon ammattilaisten tarpeet huomioiden sairaaloihin, terveyskeskuksiin ja lääkäriasemille. Sängyn suunnittelussa on otettu huomioon niin hoitajan kuin potilaan ergonomia. Selkäosan liukumekanismi estää potilaan liukumisen sängyn jalkopäätyyn.

Sängyn poikkeuksellisen laaja korkeudensäätöalue helpottaa niin hoitajan työtä kuin potilaan sängystä nousemista. ScanAfia XS -sairaalasänky täyttää testatusti sänkystandardin EN 60601-2-52 vaatimukset.

*Erinomaista ergonomiaa, hyvä
liikuteltavuus ja monipuoliset säädöt*



Kuvan tuotteessa lisävarusteita



3

Tärkeimmät ominaisuudet

- 1 Laajan korkeudensäätöalueen ansiosta erinomainen ergonomia
- 2 Suuri kuormitettavuus: SWL 260kg
- 3 Kaksoispyörien ansiosta erittäin kevyt liikutella


Tekniset ominaisuudet



Muut lisävarusteet

- Erikoispituinen (jatkettava +15cm) malli
- Korotetut kaiteet
- Kohottautumisteline
- Nousutuki
- Nesteenantoteline yhden käden pikasäädöllä
- Petaustaso
- Hoitajan ohjauspaneeli
- Sähköinen CPR-toiminto
- Virtsapussiteline
- Ruokailutaso
- Sängyn pääpuolen pääty
- Monitoripääty/monitoritaso
- Taipuisa käsiohjaimen pidin
- Patjakoko 78/88 x 205 x 13 cm
- Päätyjen väri vaihtoehdot: valkoinen, sininen, keltainen ja vaaleanvihreä.

Mittakuvat

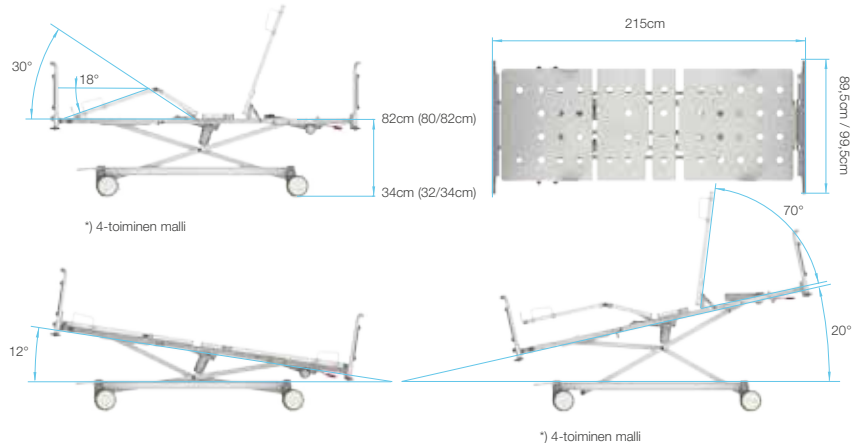

ScanAfia X ICU -sairaalasänky

Ammattilaisen ykkösvalinta vaativaan käyttöön

ScanAfia X ICU -sairaalasänky on ominaisuuksiltaan vastaava kuin XS-malli, mutta se on suunniteltu valvonta- ja teho-osastokäyttöön. Vakiona oleva hoitajaohjauspaneeli mahdollistaa sängyn toimintojen lukitsemisen potilaalta sekä sähköisiä erikoistoimintoja kuten Trendelenburg-, CPR-, ja sydänasennot. Selkäosan liukumekanismi estää potilaan liukumisen sängyn jalkopäätyn ja parantaa käyttömukavuutta.

Peräti 340kg kuormitettavuudesta huolimatta ScanAfia X ICU on kevyt ja vakiona olevien 150mm kaksoispyörien ansiosta helposti liikuteltava sänky. Sänky on suunniteltu pitkäikäiseen käyttöön alhaisin elinkaarikustannuksin. ScanAfia X ICU -sairaalasänky täyttää testatusti sänkystandardin EN 60601-2-52 vaatimukset.


Erittäin suuri kuormitettavuus mahdollistaa myös suurikokoisten potilaiden turvallisen hoidon



Tärkeimmät ominaisuudet

- 1 Erittäin suuri kuormitettavuus: SWL 340kg
- 2 Suurten kaksoispyörien (150mm) ansiosta erittäin kevyt liikutella
- 3 Peräti 20° anti-Trendelenburg-säätö mahdollistaa tehokkaan sydänasennon


Tekniset ominaisuudet

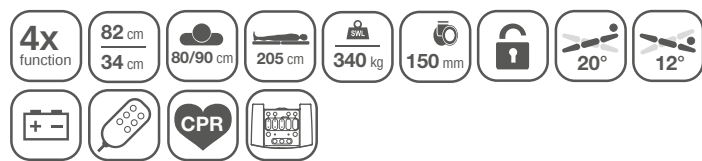

Muut lisävarusteet

- Erikoispituinen (jatkettava +15cm) malli
- Korotetut kaiteet
- Kohottautumisteline
- Nousutuki
- Nesteenantoteline yhden käden pikasäädöllä
- Petaustaso
- Virtsapussiteline
- Ruokailutaso
- Sängyn pääpuolen pääty
- Monitoripääty/monitoritaso
- Taipuisa käsiohjaimen pidin
- Patjakoko 78/88 x 205 x 13 cm
- Päätyjen väri vaihtoehdot: valkoinen, sininen, keltainen ja vaaleanvihreä.

Mittakuvat

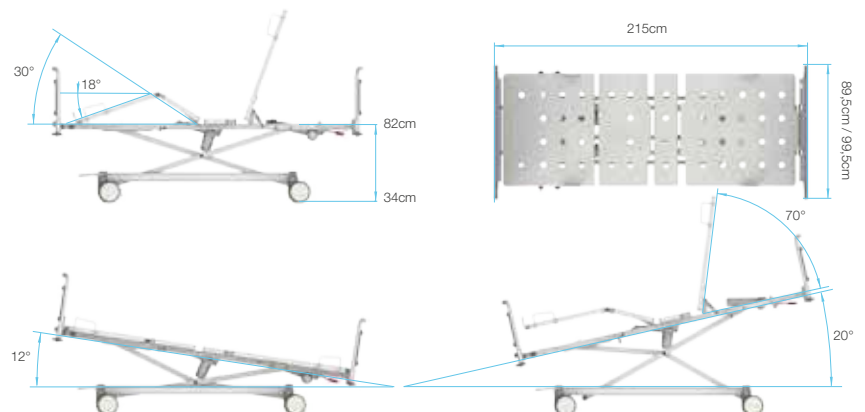

Esimerkkejä lisävarusteista sairaala- ja hoitosänkyihin



Nesteenantoteline ja kohottautumisteline



Kävelykepin ja kyynärsauvojen pidike joka sopii nesteenantotelineen holkkiin



Jatkopala 15 cm



Petaustasoksi taittuva pääty



Lukuvalaisin



Hoitajapaneelilla voidaan rajoittaa sängyn toimintoja potilaalta



Kääntyvä ja pois-nostettava nousutuki



Pehmustettu kaidesuoja



Taipuisa käsi-ohjaimen pidin



Korotettu sairaalasängyn laita



5. pyörä pienentää sängyn kääntösä-dettä ja parantaa liikuteltavuutta merkittävästi



Sängyn akkukäyttö



Luku- ja ruokailutasossa 8022 on kallistettava koivuinen pöytätaso, kiinteä aputaso, vaiva-ton korkeudensäätö sekä lukittavat pyörät.



Ruokailutasosta 2500 on saatavissa leveydet 80 cm ja 90 cm. Taso on IKI-korkeapainelaminaattia ja siinä on puureunus estämässä tavaroiden vierimistä pois pöydältä.

Yöpöydät



Yöpöydät



Yöpöytä 2020

Pöydän runko on epoksoitua, valkoista terästä. Laatikoiden etulevy on saatavissa joko IKI-korkeapainelaminaatista, massiivikoivusta tai pyökistä. Kansien pinnat ovat IKI-korkeapainelaminaattia ja reunat on pyöristetty. Helposti korkeussäädettävän ruokailutason kätisyys on vaihdettavissa ilman työkaluja. Pöydässä on neljä lukittavaa pyörää ja laatikoiden ulosvetorajoin. Lisäksi pöydässä on hoitajakutsujärjestelmän kiinnitysmahdollisuus sekä vakiovarusteena tohveliritilä. Koko (LxSxK): 49 x 57 x 90 cm

Lisävarusteet: Lukutasoksi kallistuvat ruokailulevy | Sivukori | Hoitajakutsulaitteen asennus | Lukko ylälaatikkoon

Yöpöytä 2040

Yöpöydän runko on saatavissa joko massiivikoivuisena tai pyökkisenä. Pöydänvärinen IKI-korkeapainelaminaattipintainen kansi on reunustettu pyöristetyllä koivu- tai pyökkikehällä. Helposti korkeussäädettävän ruokailutason kätisyys on vaihdettavissa ilman työkaluja. Pöydässä on neljä lukittavaa pyörää. Lisäksi pöydässä on hoitajakutsujärjestelmän kiinnitysmahdollisuus sekä vakiovarusteena tohveliritilä. Koko (LxSxK): 48 x 57 x 90 cm

Lisävarusteet: Lukutasoksi kallistuvat ruokailulevy | Sivukori | Hoitajakutsulaitteen asennus | Lukko ylälaatikkoon



Yöpöytä 2300

Edullinen uusi yöpöytä kodinomaiseen käyttöön. Pöydässä on vetolaatikko ja hylly. Pöytä on massiivipuuta, ja sitä on saatavilla valkotammen tai pyökin värisenä. Koko (LxSxK): 40 x 50 x 65 cm

Lisävarusteet: Lukko ylälaatikkoon | Yksittäislukittavat pyörät (korkeus tällöin 73 cm) | Metalliset liukukiskot

Patjat

Lojer-hygienipatja

Lojer-hygienipatja on erinomainen valinta matalan ja keskinkertaisen painehaavariskin potilaille sairaaloihin, hoivakoteihin sekä kotihoitoon, missä sen helppoa puhtaanapitoa arvostetaan. Erityisesti säätösänkyihin soveltuva peruspatja on paloturvallinen (SL 1) ja hiostamaton. Muotoleikatun 13 cm vahvan patjan runkomateriaali on kestävä ja joustavaa korkeakimmoista vaahtomuovia, joka uritetun pohjarakenteen ansiosta on ilmava ja tuo lisää joustoa patjaan potilasta tukien. Patjan 5 cm paksu viskoelastinen PU-pintamateriaali antaa patjalle miellyttävän pintapehmyyden ja tasaa kudospaineita. Päällinen on joustavaa, antibakteerista Sanitized-käsiteltyä hygieniakangasta, joka kestää pesun 90 asteessa. Painosuositus on alle 150 kg henkilöille. Patja on valmistettu Suomessa ja se on CE-merkitty.




Lojer-pelastuspatja

Lojer-pelastuspatja on käytännöllinen ratkaisu evakuoititilanteissa ja korvaa tähän mennessä käytössä olleet erilliset pelastuslakanat. Päällisen alapohja on kestävä ja liukuvaa materiaalia. Hygieniakankaasta tehtyyn päälliseen on integroitu pelastus/evakuointihihnat, jotka kiinnitetään pikalukoilla. Normaalkäytössä ne saadaan piilotettua patjan sisään, jolloin hihnat eivät haittaa petaamista. Patjan molemmissa päissä on kanto-/vetohihnat. Päällinen on joustavaa, antibakteerista Sanitized-käsiteltyä hygieniakangasta, joka kestää pesun 80 asteessa. Pelastuspatja soveltuu erinomaisesti matalan ja keskinkertaisen painehaavariskin potilaille sairaaloihin, vanhainkoteihin sekä kotihoitoon, missä sen helppoa puhtaanapitoa arvostetaan. Erityisesti säätösänkyihin soveltuva pelastuspatja on paloturvallinen (SL 1) ja hiostamaton. Muotoleikatun 13 cm vahvan patjan runkomateriaali on kestävä ja joustavaa korkeakimmoista vaahtomuovia, joka uritetun pohjarakenteen ansiosta on ilmava ja tuo lisää joustoa patjaan potilasta tukien. Patjan 5 cm paksu viskoelastinen PU-pintamateriaali antaa patjalle miellyttävän pintapehmyyden ja tasaa kudospaineita. Painosuositus on alle 150 kg henkilöille. Patja on valmistettu Suomessa ja se on CE-merkitty.



Eko™Wave -antidecubituspatja

Eko™Wave on ergonominen, korkealuokkaisen vaahtomuovipatjan kriteerit täyttävä keskinkertaisen painehaavariskin patja. Patja on suunniteltu erityisesti tukemaan potilaan omatoimisuutta samalla toimien erittäin tehokkaana painehaavojen ennaltaehkäisijänä. Patjan toimivuuden mahdollistaa aaltomainen yhdistelmä rakenne sekä hyvin paineita tasaava viskoelastinen pintakerros. Erikoisrakenteen ansiosta patja estää potilaan uppoamisen patjaan helpottaen samalla hoitajien työtä asento- ja hoitohoidossa ja potilasta liikuteltaessa. Eko™Wave-patja on valmistettu uusiutuvasta luonnon raaka-aineesta soijaöljystä. Patjan materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja turvallisia käyttäjälle, Öko-Tex sertifioituja. Patjan pinnalla on 5 cm viskoelastista PU-geelivaahtoa ja pohjassa 8 cm keskikovaa PU-kimmovaahtoa. Paloturvallinen (SL 1) PU-pinnoitteinen Medicase®-hygieniapäällinen on neljään suuntaan joustava, hengittävä ja antibakteerinen. Päällinen tukee osaltaan patjan pintapehmeys- ja ergonomiaominaisuuksia. Päällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuksella sekä useimmilla desinfektioaineilla. Päällisen voi pestä 70-95 asteessa. Painosuositus on alle 150 kg henkilöille. Patjan ja päällisen valmistaja on suomalainen MediMattress Oy ja ne ovat CE-merkittyjä. Saatavissa myös kiinteä Mediresc™-pelastuspäällinen.

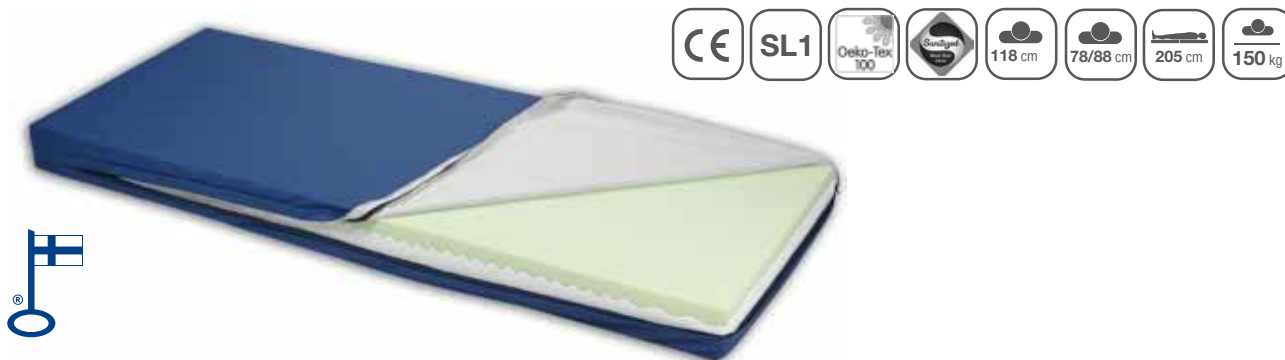

Tergo®Safe-antidecubituspatja

Tergo®Safe on valmistajan toimivin ja tehokkain korkealuokkainen keskinkertaisen painehaavariskin käyttäjille tarkoitettu antidecubituspatja painehaavojen ennaltaehkäisyyn. Tergo®Safe'n reunapalkit helpottavat hoitajan työtä. Patjan tukeva rakenne ja reunat antavat tukea potilaan asento- ja hoitohoidossa ja hoitotoimenpiteissä sekä helpottavat potilaan ergonomista siirtoa. Lisäksi reunapalkit helpottavat liikuntarajoitteisen henkilön siirtymistä vuoteeseen ja vuoteesta pois. Tergo®Safe-patja on valmistettu uusiutuvasta luonnon raaka-aineesta soijaöljystä ja se täyttää korkealuokkaisen vaahtomuovipatjan laatukriteerit. Patjan ja päällisen valmistaja on suomalainen MediMattress Oy ja ne ovat CE-merkittyjä.

Tergo®Safe3: 7 cm PU-geelivaahtoa + 6 cm PU-kimmovaahto, reunapalkit. Painosuositus 0-150 kg.


Tergo®Safe2: 5 cm PU-geelivaahtoa + 8 cm PU-kimmovaahto, reunapalkit. Painosuositus 0-180 kg.

Paloturvallinen (SL 1) PU-pinnoitteinen Medicase®-hygieniapäällinen on neljään suuntaan joustava, hengittävä ja antibakteerinen. Päällinen tukee osaltaan patjan pintapehmeys- ja ergonomiaominaisuuksia. Patjan materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja turvallisia käyttäjälle, Öko-Tex sertifioituja. Päällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuksella sekä useimmilla desinfektioaineilla. Päällisen voi pestä 70-95 asteessa. Saatavissa myös kiinteä Mediresc™-pelastuspäällinen.



Kysy myös erikoispatjojamme

Tutkimus-, hoito- ja työtuolit

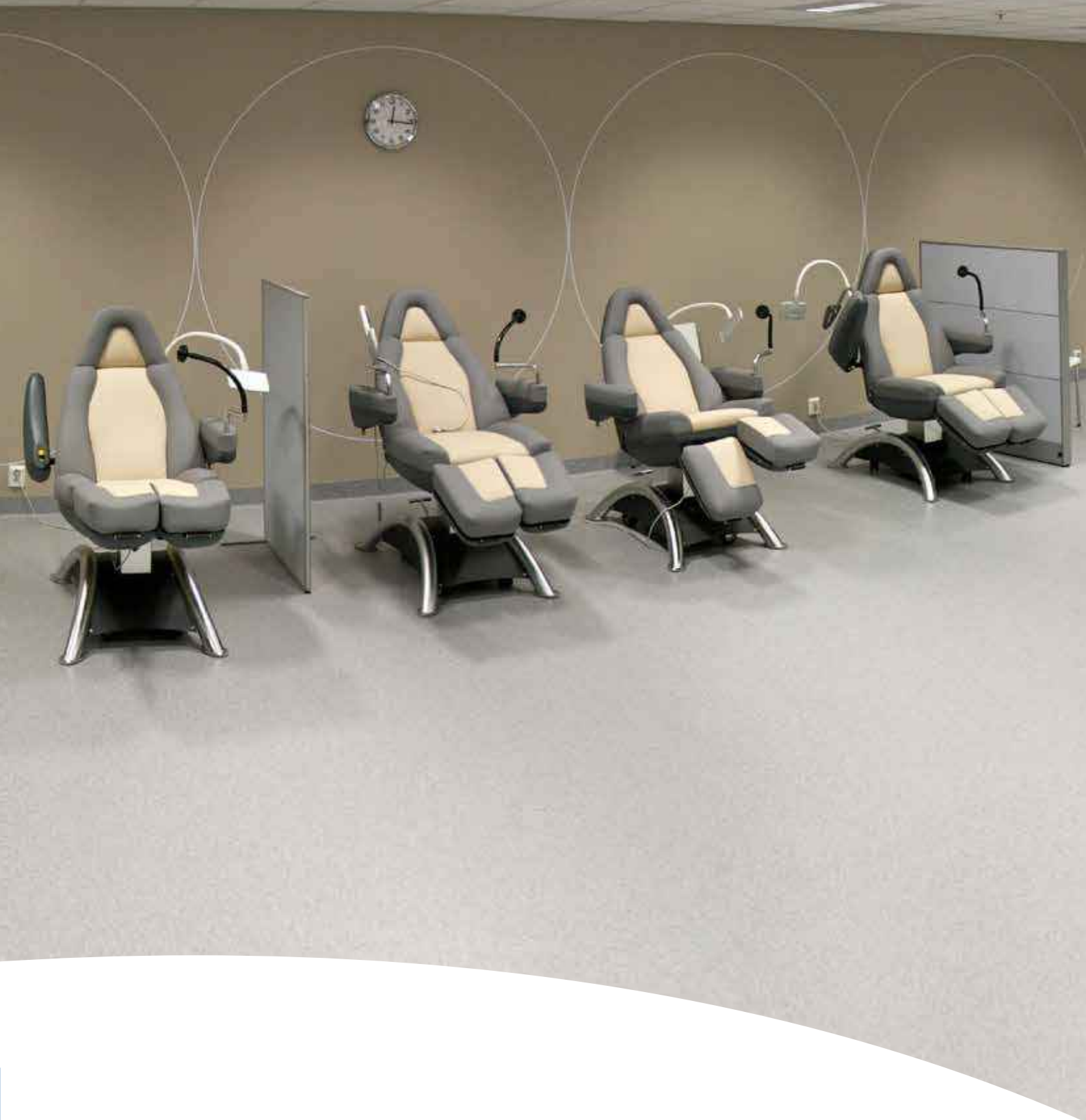

Capre RC -toipumistuoli

Päiväkirurgian jälkeiseen toipumiseen

Ylellinen Capre RC -toipumistuoli on suunniteltu yhdessä kirurgien kanssa täyttämään modernin hoitoprosessin vaatimukset päiväkirurgian jälkeisessä toipumisessa. Tuolia käytetään perinteisen sairaalasängyn asemasta edistämään potilaan vireystilaa. Pehmeä keino nahka, yksilölliset säädöt sekä mukavuusvarustus, kuten tablettitietokoneteline ja lukuvalaisin edistävät leikkausyksikön laatumielikuvaa ja parantavat potilaan elämänlaatua toipumisen aikana.

Tuolin korkeutta, selkäosaa, istuinkulmaa sekä jalkaosia voidaan säätää sähköisesti toisistaan riippumatta. Sekä pääosassa että jaetussa jalkaosassa on lisäksi pituuden säätömekanismi. Tuolissa on Trendelenburg-asento sekä kolme esiohjelmointia hoitoasentoa: (tuoli, rantatuoli ja makuutaso) sekä käyttäjän vapaasti ohjelmoitavissa oleva asento. Tuoli voidaan säätää yhdellä napin painalluksella esimerkiksi makuu- tai elvytysasentoon.

*Sänkyjä monipuolisemmat
säätömahdollisuudet potilaan
tarpeiden mukaisesti*



Kuvan tuotteessa lisävarusteita



Katso video:
<http://bit.ly/capretuoli>

2



Tärkeimmät ominaisuudet

- 1 Neljä esiohjelmoitua asentoa sekä yksi vapaasti ohjelmoitavissa oleva asento
- 2 Moderni ja näyttävä design sekä anatomisesti muotoiltu verhoilu parantaa potilasmukavuutta
- 3 Säädetty monitoimikäsituki (korkeus- ja kulmasäätö sekä rotaatio)


Tekniset ominaisuudet



Muut lisävarusteet

- Niskatyyny
- Näytteenotto-käsituki
- Tablettiteline taipuisalla varrella
- Tarjotin
- Nesteenantoteline yhden käden säädöllä
- Led-lukuvalaisin
- Trendelenburg-jalkaohjain
- Langallinen käsiohjain

Mittakuvat

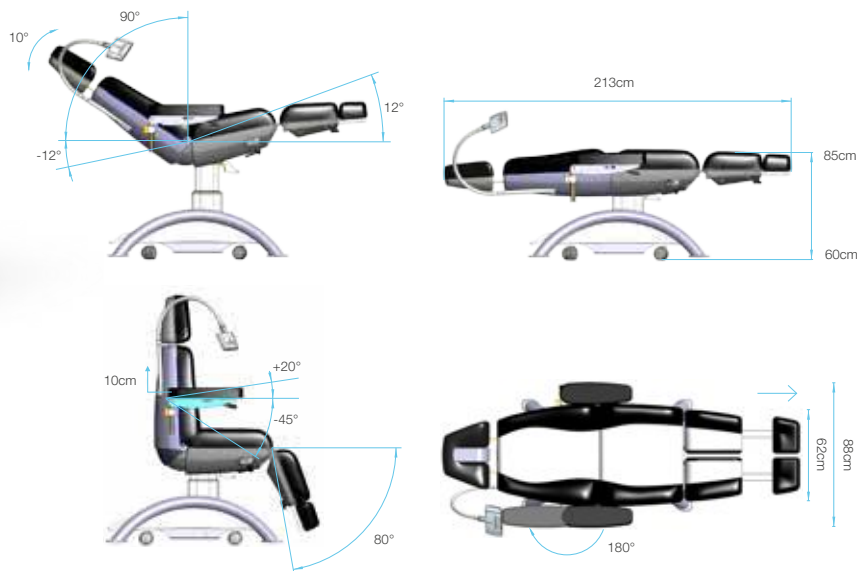

Capre MC -monitoimituoli

Potilasmukavuutta vaativiin hoitotoimenpiteisiin

Capre MC -monitoimituoli on suunniteltu yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa täyttämään modernit hoitovaatimukset muun muassa dialyysi- ja sytostaattihoidoissa. Modulaarisen rakenteensa ansiosta tuoli soveltuu käytettäväksi myös tutkimustuolina. Tuolissa on Trendelenburg-asento sekä kolme esiohjelmoitua hoitoasentoa: (tuoli, rantatuoli ja makuutaso) sekä käyttäjän vapaasti ohjelmoitavissa oleva asento. Tuoli voidaan säätää yhdellä napin painalluksella esimerkiksi makuu- tai elvytysasentoon.

Malli eroaa Capre RC -toipumistuolista siinä, että tuolin jalkaosa on moottoroitu ja yksiosainen, ja siinä on optiona säädettävä jalkavaste.

*Erinomaista ergonomiaa -
monipuoliset säädöt ja helppo
muunneltavuus*



Katso video:
<http://bit.ly/capretuoli>

Tärkeimmät ominaisuudet

- 1 Korkeuden, selkäosan, istuinkulman sekä jalkaosan erillissäätö sähköisesti
- 2 Neljä esiohjeloitua asentoa sekä yksi vapaasti ohjelmoitavissa oleva asento
- 3 Potilaan itsensä säädettävä jalkavaste (optio)


Tekniset ominaisuudet



Muut lisävarusteet

- Niskatyyny
- Säädettävä näytteenotto -käsituki
- Säädettävä jalkavaste
- Tablettiteline taipuisalla varrella
- Tarjotin
- Nesteenantoteline yhden käden säädöllä
- Led -lukuvalaisin
- Trendelenburg-jalkaohjain
- Langallinen käsiohjain
- Jalkaosan suojamuovi

Mittakuvat

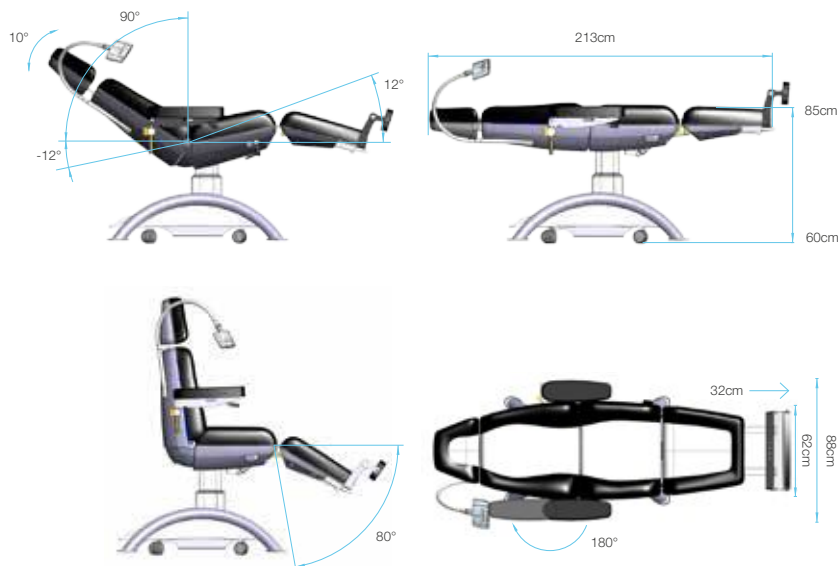



Geriatrinen tuoli 6702

Lojerin geriatrinen tuoli on yksi markkinoiden monikäyttöisimmistä. Tuolin suunnittelussa on kiinnitetty huomiota ennen kaikkea istumamukavuuteen ja toiminnallisuuteen. **Vakiovarusteet:** | Epoksinnoitettu teräsrunko | Tukeva työntökahva | Erillislukittavat 125/150 mm pyörät | Suuntapyörä | Tuoli kallistuu portaattomasti kaasujousikevennettynä | Pohjeosa kallistuu portaattomasti kaasujousikevennettynä | Jalkalauta säädettävissä portaattomasti kaasujousikevennettynä | Taaksepäin kääntyvät käsinojat | Käsinojen portaaton kaltevuussäätö | Niskatyyny | Lehtipidin | Ruokalevy joka lukittuu käsinojiin (syvyys säätö) Verhoiluvaihtoehdot: Keinonahka tai mikrokuitukangas (kankaan sisäpinta on uretaanikosteussuojattu, päällinen paikallaan pestävää mikrokuitunukkaa)

Lisävarusteet: Mikrokuitukangas | Tuoliturvavyö istuinkarvalla, haaramalli | Niskatuki(pari) | Vartalotuki(pari) | Pituussäädettävä pohjetuki



Hydraulinen hoitotuoli 6800

Lojerin hydraulinen hoitotuoli on valmistettu kestämään kovaa käyttöä. Tuolissa on korkealaatuinen epoksinnoitettu teräsrunko ja portaaton korkeussäätö (51 – 83cm) hydraulisella jalkapumpulla. Pohjeosa kallistuu portaattomasti kaasujousikevennettynä ja selkänoja vastaavalla tavalla makuuasentoon. Verhoilu on helposti puhdistettavaa keinonahkaa ja istuinosat on muotoiltu ergonomisesti.

Vakiovarusteet: | Alas kääntyvä jalkalauta | Lukittavat 160 mm pyörät | Suuntapyörä | Taakse kääntyvät käsinojat, 4 asentoa pikalukolla

Lisävarusteet: Pohjetuki | Nesteenantoteline | Näytteenottokäsinojat



Pyörivä tutkimus- ja toimenpidetuoli 6900

Tuolissa on sähköinen korkeussäätö (56 - 76cm), makuuasennon säätö sekä yhdistetty selkänojan ja pohjetuen säätö helppokäyttöisellä käsiohjaimella. Lisäksi tuolissa on lukittavat alas- ja taaksepäin kääntyvät käsinojat. Istuinosa pyörii 200 astetta. Selkäosa on lyhyt ja päätuki aukollinen. Verhoilu on helposti puhdistettavaa keinonahkaa. Lisäksi tuolissa on jalkalauta ja ylösnostettavat pyörät.

Lisävarusteet: Näytteenotto-käsinojat | Sähköinen jalkaohjain selkänojan säätöön | Sähköinen jalkaohjain korkeus- ja vaaka-asennon säätöön



Työtuolit ja jakkarat



Pyöreä tuoli 24101

Pyöreä tuoli, jossa on tukeva jalkaristikko ja pyörät. Tuolissa on kaasujousikeventein korkeudensäätö, josta on valittavissa matala (42 - 55cm), medium (50 - 70cm) tai korkea (58 - 83cm) säätöalue. Verhoilu on harmaata keinonahkaa, mutta hieman pidemmällä toimitusajalla on valittavissa myös muita värejä. Maksimikuorma 150 kg. **Lisävarusteet:** Jalkatukirengas | Korkeudensäätö jalkapedaalilla | Lukittavat pyörät istuttaessa.

70 cm 50 cm	37 cm	150 kg		55 cm 42 cm	83 cm 58 cm
----------------	-------	--------	--	----------------	----------------

Step Anatomic 24106

Anatomisesti muotoiltu istuin, jossa on tukeva jalkaristikko ja pyörät. Tuolissa on kaasujousikeventein korkeudensäätö, josta on valittavissa matala (42 - 55cm), medium (50 - 70cm) tai korkea (58 - 83cm) säätöalue. Verhoilu on harmaata keinonahkaa, mutta hieman pidemmällä toimitusajalla on valittavissa myös muita värejä. Maksimikuorma 150 kg. **Lisävarusteet:** Jalkatukirengas | Korkeudensäätö jalkapedaalilla | Lukittavat pyörät istuttaessa.

70 cm 50 cm	39 cm	150 kg		55 cm 42 cm	83 cm 58 cm
----------------	-------	--------	--	----------------	----------------



Easy Rider -satulatuoli 24202

Satulatuoli, jossa ei ole saumoja istuinosassa. Tuolissa tukeva jalkaristikko ja pyörät. Tuolissa on kaasujousikeventein korkeudensäätö, josta on valittavissa matala (37 - 60cm), medium (55 - 75cm) tai korkea (63 - 88cm) säätöalue sekä istuinkulmansäätö. Verhoilu on mustaa nahkaa, mutta hieman pidemmällä toimitusajalla on valittavissa myös muita värejä. Maksimikuorma 150 kg. **Lisävarusteet:** Jalkatukirengas | Korkeudensäätö jalkapedaalilla | Lukittavat pyörät istuttaessa.

75 cm 55 cm	50 cm	150 kg		60 cm 37 cm	88 cm 63 cm
----------------	-------	--------	--	----------------	----------------

Easy Rider Pro -satulatuoli 24205

Satulatuoli, jossa on 2-osainen säädettävä istuinosa sekä tukeva jalkaristikko ja pyörät. Tuolissa on kaasujousikeventein korkeudensäätö, josta on valittavissa matala (37 - 60cm), medium (55 - 75cm) tai korkea (63 - 88cm) säätöalue sekä istuinkulmansäätö. Verhoilu on mustaa nahkaa, mutta hieman pidemmällä toimitusajalla on valittavissa myös muita värejä. Maksimikuorma 180 kg. **Lisävarusteet:** Jalkatukirengas | Korkeudensäätö jalkapedaalilla | Lukittavat pyörät istuttaessa.

75 cm 55 cm	50 cm	180 kg		60 cm 37 cm	88 cm 63 cm
----------------	-------	--------	--	----------------	----------------



Suihkukalusteet ja kuljetus- ja ensiapupaarit

Suihkupaari Veera 4310



Tukevassa vaunussa on hydraulinen korkeussäätö jalkapolkimilla säätöalueelle 54 - 87cm. Vaunuun kuuluu lämpöeristetyt pehmusteet ja tyyny. Kaiteiden ohjaus toimii helposti molemmista päistä. Vaunun runko on ruostumatonta terästä ja epoksimaalipinnoitettua. Vaunussa on vakiona kestävät ja laadukkaat 150mm vesitiiviit pyörät sekä suuntapyörälukitus keventämään ja helpottamaan käytäväkuljetuksia osastolla. Vaunu voidaan kallistaa tyhjennysasentoon kaasujousella sekä siitä löytyy poistoletku säilytys- ja valumisenestokoukuilla.



Suihkutuoli Venla 4080

Erittäin tukevassa suihkutuolissa on hydraulinen korkeudensäätö, sivulle kääntyvät korkeussäädettävät jalkatuet ja tukikaareksi kiertyvät käsinojat. Tuolin rakenne on ruostumatonta terästä ja siinä on ruostumattomat 125 mm yksittäislukittavat pyörät ja suuntapyörälukitus. Istuin ja selkäosa ovat pehmeää uretaania, jossa on liukumista estävä pinnoite. Hydraulinen korkeussäätö (52 - 87cm) toimii jalkapolkimella. Sopii kaikkien yleisimpien WC-istuinten päälle ja rajoitettuihin saunomiseen (nostokorkeus 86 cm). **Lisävarusteet:** WC-malja ja pidike | Kansi istuinaukkoon ja vesityyny.



Ensiapupaari EA 4315

Paarissa on kestävä hydraulinen korkeussäätö jalkapolkimilla ja selkäosan säätö toimii kevyesti kaasujousella. Selkänojan ja makuutason levyt ovat helposti puhdistettavaa ja kestävää IKI-korkeapainelaminaattia. Paarissa on vakiona keskuslukittavat 150 mm pyörät sekä alaskäännettävä työntökahva. Lisäksi varusteina Trendelenburg-säätö | Infuusionestetelineen holkkeja 4 kpl | Törmäyspyörät | Pehmuste | Röntgenkasettitasku selkänojan alla | Paperirullateline | Happipullonteline 5kg pullolle | Varustekori alarunkoon | Kiinnitysvyöt ja sivulaitapari.



Hydraulinen kuljetuspaari 4315

Suosittu paari, jossa on jalkapolkimella toimiva hydraulinen korkeudensäätö. Lisäksi paarissa on kaasujousikeventein selkänojan säätö sekä Trendelenburg-säätö. Paarissa on korkea, alaskäännettävä työntökahva, törmäyspyörät, keskuslukittavat 125mm pyörät, infuusionestetelineen holkkeja 4 kpl ja kaiteiden kiinnitysholkit. **Lisävarusteet:** Röntgenkasettitasku | Paperirullateline | Sivulaitapari | Varustekori | Kiinnitysvyöt | Nesteenantoteline ja happipulloteline



Sivun tuotteissa lisävarusteita

Tutkimus- ja gynekologiset pöydät



Yleistutkimuspöytä 4040X

Uusi ja monipuolinen yleistutkimuspöytä

Täysin uusi 4040X -yleistutkimuspöytä soveltuu yleistutkimuspöydäksi erilaisiin terveydenhuollon toimipisteisiin. Patentoidun rakenteen ja erittäin matalan alakorkeuden ansiosta myös lapset ja vanhukset voivat nousta pöydälle vaivattomasti. Pöytä on kevyempi ja helpommin liikuteltava kuin perinteiset tutkimuspöydät. Uusi moottoritekniikka mahdollistaa selkäosan korkeussäädön sähköisesti tai tarvittaessa käsin nostamalla.

Markkinoiden laajin korkeudensäätöalue ja suuri kuormitettavuus mahdollistavat ergonomiset työasennot ja luovat turvallisuutta potilaan tutkimus- ja siirtotilanteissa. Pöydässä on vakiona paperirullateline ja -leikkuri sekä adapteri nesteenantotelineelle (6 eri asennuspaikkaa). Lisävarusteena saatavalla Handsfree-korkeudensäätötangolla pöydän korkeutta voidaan säätää jalalla molemmilta puolilta.

*Markkinoiden matalin tutkimuspöytä
– alakorkeus vain 40cm*



Kuvan tuotteessa lisävarusteita



Tärkeimmät ominaisuudet

- 1 Markkinoiden paras korkeudensäätöalue 40-95 cm
- 2 Selkeä rakenne mahdollistaa helpon puhdistamisen ja varmistaa korkean hygienian
- 3 Uudet painovoimaisesti laskeutuvat turvamootorit parantavat potilas- ja käyttäjäturvallisuutta


Tekniset ominaisuudet



Muut lisävarusteet

- Sivulaidat
- Nesteenantoteline
- Käsituki
- Niskatyyny
- Tutkimusvalo
- Työntökahvat
- Antimikrobinen verhoilu
- Antistaattinen verhoilu
- Sivukisko 10x25 mm (max 6 kpl)
- Kaikki sivukiskoon kiinnitettävät lisävarusteet
- Anestesiakaari

Mittakuvat

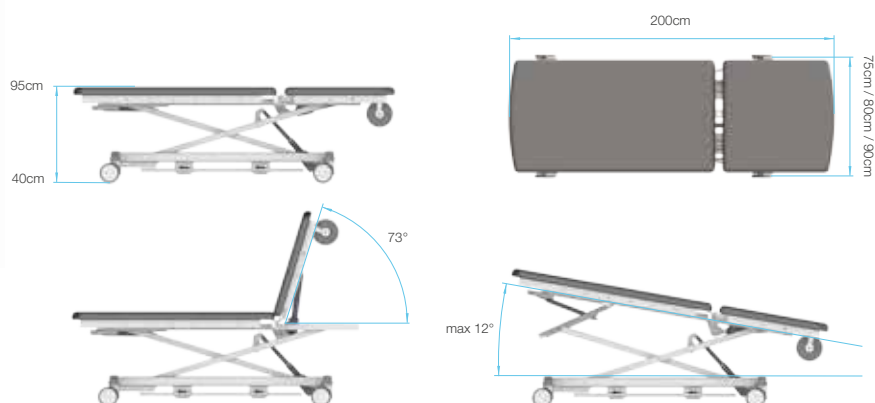

Gynekologinen yleistutkimuspöytä Afia 4050M

Vaativaan tutkimus- ja toimenpidekäyttöön

Afia 4050M -gynekologinen yleistutkimuspöytä soveltuu vaativaan tutkimus- ja toimenpidekäyttöön. Pöydälle nouseminen on helppoa matalan alakorkeuden ansiosta, ja hoitotasoon on saatavilla 20 korkealaatuista SKAI -verhoilua ja myös antibakteerinen ja antistaattinen vaihtoehto. Moottorein ja kaasujousin tehtävät portaattomat säädöt helpottavat merkittävästi hoitohenkilökunnan työtä. Pöydässä on vakiona säädettävät kantapäätuet, yksi sivukisko, kiskolukko ja paperirullateline.

*Erinomaista ergonomiaa -
monipuoliset säädöt ja helppo
muunneltavuus*



Kuvan tuotteessa lisävarusteita

Tärkeimmät ominaisuudet

- 1 Keskus- ja suuntalukittavat kaksoispyörät: 17% kevyempi liikuteltavuus ja 95% parempi tukevuus
- 2 Sähköinen korkeudensäätö joka puolelta pöytää käsin koskematta
- 3 Portaaton istuinosan säätö 0-15 astetta kaasujousin


Tekniset ominaisuudet



Muut lisävarusteet

- Antistaattiset pyörät ja antistaattinen-verhoilu
- Säädettävät pohjetuet
- Niskatyyny
- Leikkuri paperirullatelineeseen
- Sivulaita
- Tutkimusvalo
- Käsituki
- Sivukisko 10x25 mm (max 6 kpl)
- Kaikki sivukiskoon kiinnitettävät lisävarusteet

Mittakuvat

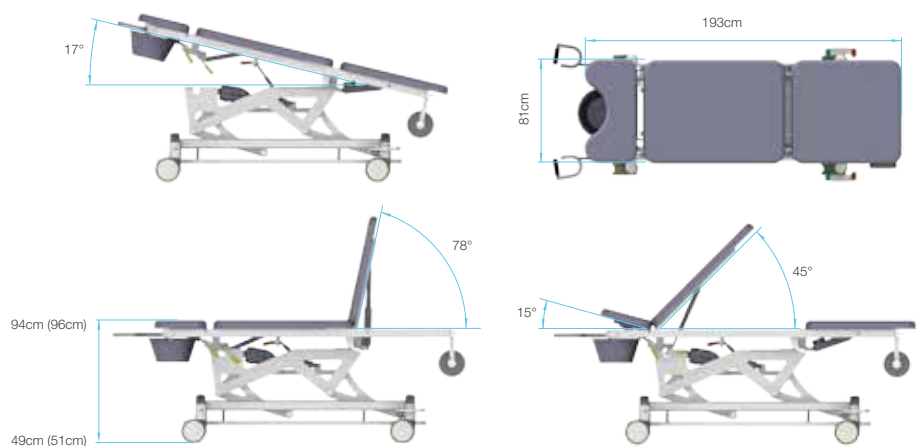

Gynekologinen tutkimustuoli Afia 4060

Monipuoliset ja helppokäyttöiset säädöt

Afia 4060 on helppokäyttöinen tutkimustuoli erityisesti gynekologisiin ja urologisiin toimenpiteisiin. Siinä on kaksiosainen makuutaso, monipuoliset ja helppokäyttöiset säädöt sekä hyvä perusvarustus, kuten niskatyyny ja paperirullateline. Tuoleille on saatavilla 20 korkealaatuista SKAI -verhoilua ja myös antibakteerinen ja antistaattinen vaihtoehto.

Afia 4060 -gynekologisessa tutkimustuolissa on säädettävät kantapäätuet sekä sähköinen korkeuden, istuinosan ja selkäosan säätö, joiden ohjaus tapahtuu käsiohjaimella.

Tuoli voidaan säätää sähköisesti myös Trendelenburg-asentoon.

*Monipuolinen tutkimustuoli
pieniin tiloihin*



Kuvan tuotteessa lisävarusteita



Tärkeimmät ominaisuudet

- 1 Sähköinen korkeuden, selkäosan ja istuinosa säätö
- 2 Pieni tilantarve: kokonaispituus 140cm
- 3 Trendelenburg-asento sähköisesti

Tekniset ominaisuudet



Muut lisävarusteet

- Pohjetuet
- Käsinojat
- Leikkuri paperirullatelineeseen



1

Mittakuvat



Yleistutkimuspöytä Capre E2

Tukeva ja toiminnallinen tutkimuspöytä

Tutkimuhuoneessa työskentelyyn tarkoitettu Capre E2 on monipuolinen tutkimuspöytä, jonka muunneltavuus, säädettävyys ja hiljainen käyntiäänäni lisäävät pöydän käyttömukavuutta ja toiminnallisuutta. Pöytä seisoo tukevasti omilla jaloillaan eikä siinä ole suuria kuljetuspyöriä. Pöytä on muotoilultaan moderni ja hinta-laatu-suhteeltaan erinomainen.



Moderni ja tukeva yleistutkimuspöytä

Kuvan tuotteessa lisävarusteita

Tärkeimmät ominaisuudet

- 1 Tarpeiden mukaan laajennettavat ominaisuudet
- 2 Pöytä seisoo tukevasti omilla jaloillaan likaamattomilla kumitassuilla
- 3 Kuormitettavuus (SWL) 210kg


Tekniset ominaisuudet



Muut lisävarusteet

- Paperirullateline
- Leikkuri paperirullatelineeseen
- Niskatyyny
- Valmius nesteenantotelineelle
- Nesteenantoteline

Mittakuvat

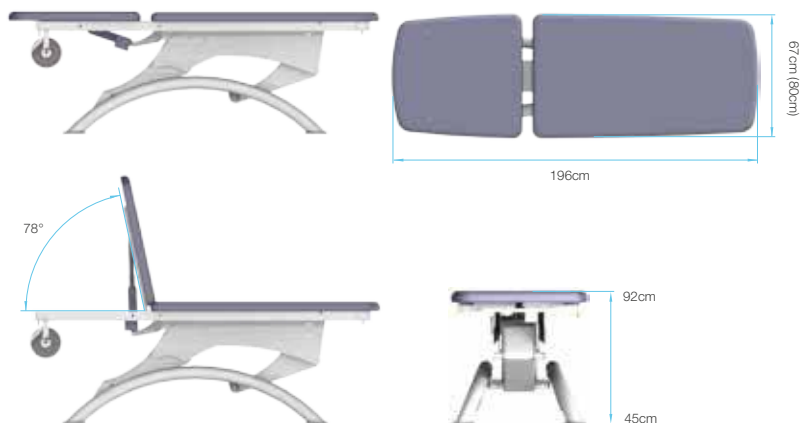

Sairaala- ja tarvikevaunut





Insausti-sairaalavaunut

Kestävää laatua ja muokattavuutta

Insausti® on espanjalainen sairaalalogistiikan tuotteiden valmistaja, joka on erikoistunut ruostumattomasta teräksestä valmistettaviin terveydenhuollon kalusteisiin ja erityisesti sairaaloiden vaunuihin sekä logistisiin hyllyjärjestelmiin. Insausti® -sairaalavaunut valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista, ja ne vastaavat alan tiukimpia vaatimuksia. Monipuolisilla lisävarusteilla räätälöimme asiakkaan tarpeiden mukaisen ratkaisun.

Korkea laatu, helppo muunneltavuus ja erinomainen käytettävyys

2

1



Katso video:
<http://bit.ly/insausti>



Tärkeimmät ominaisuudet

- 1 Pöytätasot polyeteeniä, joka kestää hyvin esimerkiksi puhdistus- ja desinfiointiaineita
- 2 Vaunuissa helposti puhdistettavat pyöreät reunat
- 3 ISO-järjestelmän mukaiset itsesulkeutuvat laatikot, jotka avautuvat 110%

Tekniset ominaisuudet

Pöytätaso: Koko 640 x 480 mm tai 900 x 630 mm | Polyeteeniä, 6 mm paksu, etuvahvistus 17 mm | Kestää etanolia, puhdistus- ja desinfiointiaineita sekä klooriheksidiiniä

Runko: Pyöreiden kulmien ansiosta helppo puhdistaa | Korkeus 950 tai 980 mm | Ruostumatonta terästä AISI304, levyn paksuus 1,2 mm | Satiiniviimeistely, joka ehkäisee bakteerien ja lian tarttumista | Käytännöllinen design | Korroosiota estävä ja hygieeninen | Vahvistettu pyörien kiinnitys

Pyörästö: Kaksoispyörät Ø 100 mm tai 125 mm | Moderni muotoilu | Erinomainen liikuteltavuus | Kuormitus 100 kg per pyörä | Suljettu rakenne ehkäisee lian kerääntymistä | 2 antistaattista pyörää ja 2 pyörää lukittavissa jalkapedaalilla

Laatikosto: ISO 3394 -standardin mukainen | Etulevyt polyeteeniä, 10 mm paksu | 6 vakioväriä: valkoinen, sininen, violetti, vihreä, keltainen, punainen | Laatikoiden korkeutta voi vaihdella | Kokonaisaukema 110 % pehmeästi ja hiljaisesti | Teleskoop-piset, kuulalaakeroidut sivukiskot | Turvallinen itsesulkeutuva järjestelmä, laatikostot pysyvät kiinni kun vaunua liikutellaan | Max. kuormitus 20 kg per laatikko | Sisäkehys ISO 600 x 400 mm mustaa polyeteeniä | Funktionaalinen järjestelmä, jossa suuri varastointikapasiteetti.

Lisävarusteet muun muassa: lisähylly, laptop-pöytä, annos- ja sivulokerikko, tarvikelkku, lisälaitelkku, jäteneula-/astiateline, katetriteline, elvytyslauta, nesteento- ja johdinteline sekä käsihuuhdeannostelija.



Insausti SQ -sairaalavaunut

Kompakti vaunu monipuolisin ominaisuuksin

Insausti Square SQ -sairaalavaunut on suunniteltu erityisesti ahtaisiin tiloihin, joissa korostuu vaunujen helppo liikuteltavuus. Vaunujen koko on vain 480x480mm ja korkeus 980mm. Vaunuissa on isot Ø100mm kaksoispyörät.

SQ -sairaalavaunuissa on värikoodausjärjestelmä, joka mahdollistaa osastokohtaisen personoinnin ja laatikoiden sisällön erottamisen selkein värikodein.

Monipuolinen ratkaisu ahtaisiin tiloihin



Katso video:
<http://bit.ly/insausti>



Tärkeimmät ominaisuudet

- 1 Hyvä liikuteltavuus: kaksoispyörät Ø 100 mm, kahdessa pyörässä lukitus
- 2 Kompakti koko: leveys 480 mm, syvyys 480 mm ja korkeus 980 mm
- 3 Turvallinen itsesulkeutuva järjestelmä, laatikot aina kiinni

Tekniset ominaisuudet

Pöytätaaso: Koko 480 x 480 mm | polyeteeniä, 6 mm paksu, etuvahvistus 17 mm
| Kestää etanolia, puhdistus- ja desinfiointiaineita sekä klooriheksidiiniä

Runko: Pyöreiden kulmien ansiosta helppo puhdistaa | Korkeus 980 mm
| Ruostumatonta terästä AISI304, levyn paksuus 1,2 mm | Satiiniviimeistely, joka ehkäisee bakteerien ja lian tarttumista | Käytännöllinen design | Korroosiota estävä ja hygieeninen | Vahvistettu pyörien kiinnitys

Pyörästä: Kaksoispyörät Ø 100 mm | Moderni muotoilu | Erinomainen liikuteltavuus
| Kuormitus 100 kg per pyörä | Suljettu rakenne ehkäisee lian kerääntymistä |
2 pyörää lukittavissa jalkapedaalilla

Laatikosto: ISO 3394 -standardin mukainen | Etulevyt polyeteeniä, 10 mm paksu
| Värikoodausjärjestelmä | Kokonaisaukema 110 % pehmeästi ja hiljaisesti
| Teleskooppiset, kuulalaakeroidut sivukiskot | Turvallinen itsesulkeutuva järjestelmä,
laatikostot pysyvät kiinni kun vaunua liikutellaan | Max. kuormitus 30 kg per laatikko

Lisävarusteet muun muassa: valinnaiset värikortit sisällön tunnistamiseen ja osastokohtaiseen personointiin, lisähylly, laptop-pöytä, annos- ja sivulokerikko, tarvikkeouri, lisälaittekisko, jäteneula-/astiateline, katetriteline, elvytyslauta, nesteenantto- ja johdinteline sekä käsihuuhdeannostelija.



Sairaala-, tarvike- ja yleisvaunut



Anestesiavaunut

Vaunut anestesiaan ja tehohoitoon. Insausti 300-sarjan vaunujen koko on 640 x 480mm tai 900 x 630mm. Vaunut ovat muokattavissa lukuisin lisävarustein ja vaihtoehdoin. Laatikkojen koko on ISO 3394 –standardin mukainen 600 x 400 mm.

Elvytysvaunut

Monipuoliset ja muokattavat elvytysvaunut. Insausti 100-sarjan elvytysvaunujen koko on 640 x 480mm. SQ- sarjan kompaktien elvytysvaunujen koko on 480 x 480 mm.



Lääkevaunut

Lääkevaunuja yksittäisistä vaunuista lääkejakelun järjestelmiin. Insausti 100-sarjan lääkevaunujen koko on 640 x 480 mm ja SQ-sarjassa 480 x 480 mm. Vaunut ovat muokattavissa lukuisin lisävarustein ja vaihtoehdoin.



Kuljetusvaunut

Vaunujen sovellusalueita ovat muun muassa hoito- ja valmistelualueet, päiväkirurgia, tutkimushuoneet sekä hammas- ja eläinklinikat. Paljon erilaisia malleja ja vaihtoehtoja.



Yleisvaunut

Runko on ruostumatonta terästä ja pöytätaaso polyeteeniä. Vaunuissa on 2 antistaattista ja 2 lukittavaa pyörää. Saatavilla lukuisia lisävarusteita.



Voit valita valmiita kokonaisuuksia tai varustella vaunuja tarpeidesi mukaan. Katso lisätiedot osoitteesta: www.lojer.com > terveydenhuolto > sairaalavaunut

Nesteenantotelineet



Nesteenantotelineitä käytetään lukuisissa sovelluksissa sairaaloissa, terveyskeskuksissa, lääkäriasemilla sekä kotihoidossa. Ne voidaan kiinnittää Lojerin eri sänky- ja tutkimuspöytämalleihin tai liikuttaa omilla pyörillään käyttökohteeseen. Nesteenantotelineissä on vakiona yhden käden säätö, joka helpottaa suuresti hoitohenkilökunnan työtä. Käyttökohteesta riippuen voidaan valita kromattu tai ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko.

60121 - suora malli sairaalakalusteisiin

Kromattua terästä oleva suora nesteenantoteline. 4 koukua joiden kapasiteetti 4 x 2 kg. Yhden käden korkeussäätö.

60122 - taivutettu malli sairaalakalusteisiin

Kromattua terästä oleva taivutettu nesteenantoteline. 4 koukua joiden kapasiteetti 4 x 2 kg. Yhden käden korkeussäätö.

60123H - suora malli pyörillä

Kromattua terästä oleva suora nesteenantoteline viidellä pyörällä (Ø80 mm), joista kaksi on lukittavia ja antistaattisia. 4 koukua, joiden kapasiteetti on 4x2 kg. Yhden käden korkeussäätö (1300-2170 mm). Telineen kokonaispaino 6,5 kg ja halkaisija 635 mm.

60124H - taivutettu malli pyörillä

Kromattua terästä oleva taivutettu nesteenantoteline viidellä pyörällä (Ø80 mm), joista kaksi on lukittavia ja antistaattisia. 4 koukua, joiden kapasiteetti 4x2 kg. Yhden käden korkeussäätö (1490-1870 mm). Telineen kokonaispaino 6,5 kg ja halkaisija 635 mm.

60120 - suora malli rst-kiskoihin


Suora nesteenantoteline ruostumatonta terästä, halkaisija 18 mm. Vaatii kiskolukon. 4 koukua, joiden kapasiteetti 4x2 kg. Yhden käden korkeussäätö.

60125 - taittuva malli std-sivukiskoihin

Taittuva, ruostumatonta terästä oleva malli kaikkiin EU-mukaisiin 10x25 mm sivukiskoihin (sis. kiskolukon). Kiinnitetään esimerkiksi leikkaus- tai tutkimuspöydän sivukiskoon. 2 koukua, joiden kapasiteetti 2x2 kg. Yhden käden korkeussäätö. Telineen kokonaispaino 2 kg.


60127 – vaativan hoidon malli pyörillä

Ruostumatonta terästä/ alumiinia oleva vaativan hoidon nesteenantoteline pyörillä. Yhden käden korkeussäätö (1500-2300 mm). 4 koukua, joiden kapasiteetti 4x2 kg. Kaksoispyörät 5x75 mm, joista kaksi lukittavaa ja antisistaattista. Erikoistukeva jalusta, telineen kokonaispaino 11 kg ja jalustan halkaisija 630 mm.

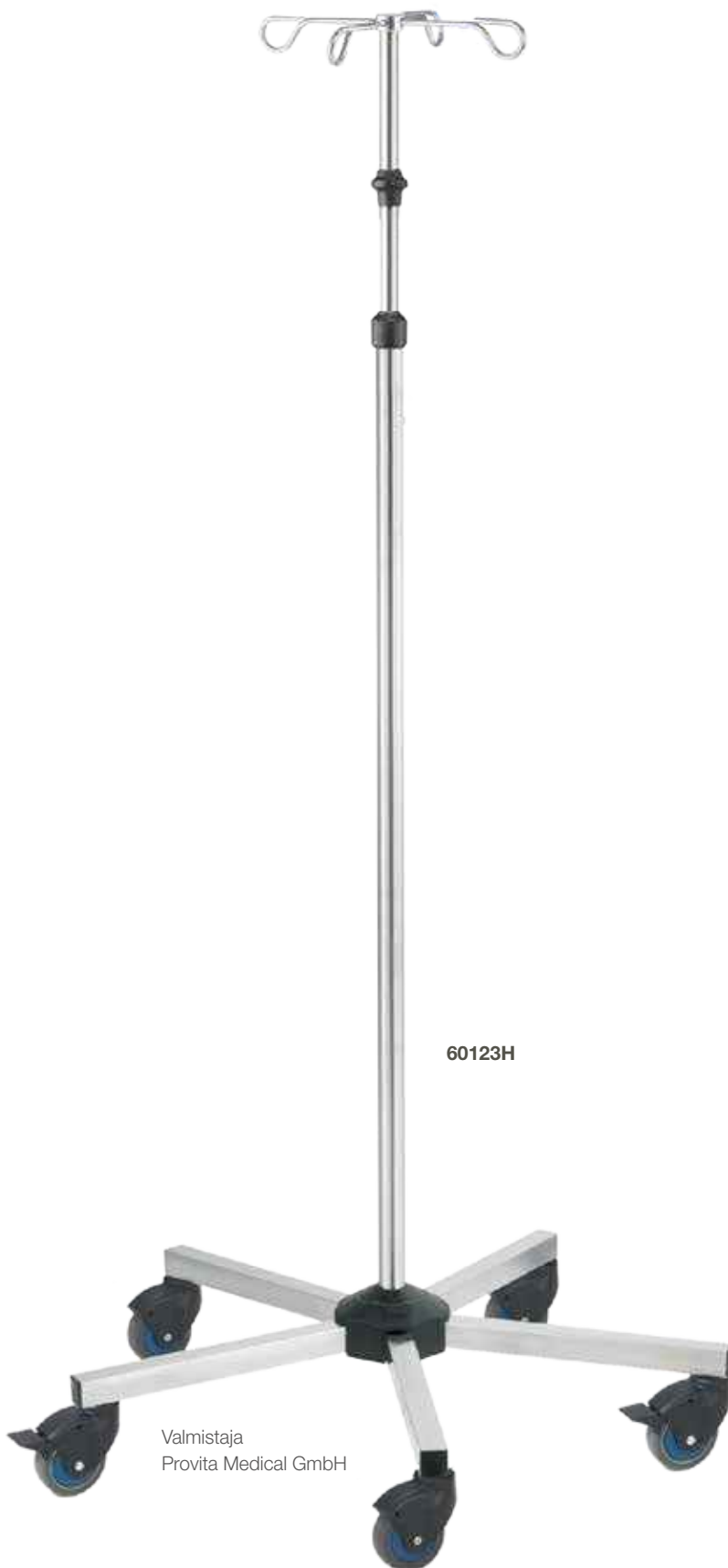

Valmistaja
Provita Medical GmbH

Potilasverhot ja -sermit

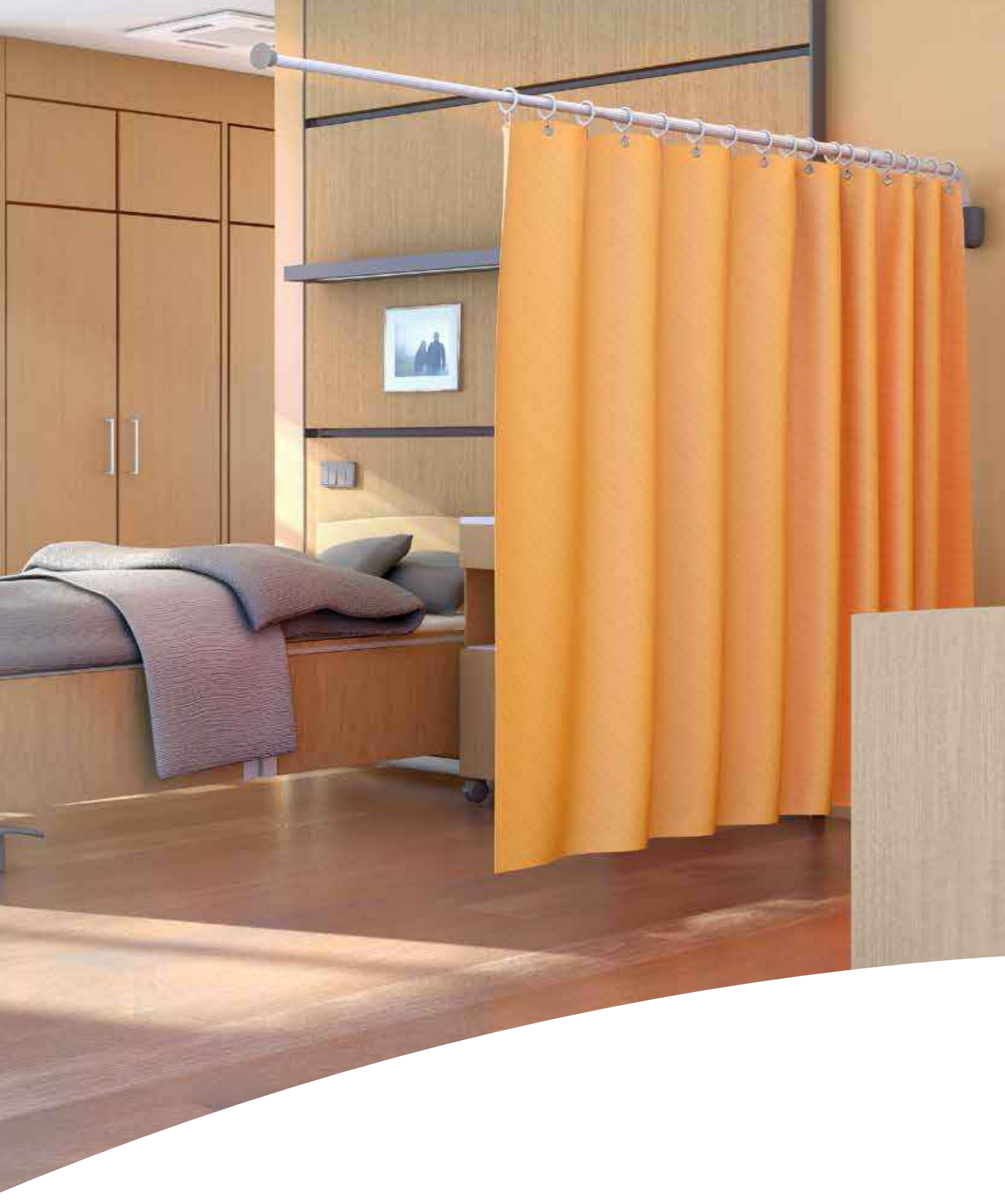

Ropimex-potilasverhot ja sermit




Ropimex-potilasverhot

Saksalaisen Ropimexin teleskooppisesti säädettävät verhojärjestelmät täyttävät tiukat paloturvallisuus- ja antibakteeriset vaatimukset. Terveystenhoitoon suunnitellut verhoankaat on valmistettu korkealaatuisesta Trevira® CS -tekstiilistä, joka on läpäissyt paloturvallisuustestit ympäri maailmaa. Trevira CS Bioactive -kankaassa on lisäksi antimikrobinen ominaisuus. Kankaat voidaan pestä ja desinfioida 60 asteen lämpötilassa. Verhoille on tarjolla 11 väri vaihtoehtoa (Bioactive 4 väriä). Myös suihkutiloihin on mahdollista asentaa verhojärjestelmiä. Patentoitua CHEK-suihkukangasta ei tarvitse pestä, vaan tahrat yksinkertaisesti pyyhkitään pois sienellä käyttäen normaaleja puhdistusaineita.

Ropimex-verhotangot

Helppokäyttöisen teleskooppisen verhotangon ansiosta hoitaja voi muutamassa hetkessä ottaa väliverhon käyttöön tai vaihtoehtoisesti laittaa sen seinälle piiloon. Tanko avataan ja suljetaan liitoskohdasta kiertämällä. Verhon voi nostaa kokonaan irti telineestään, ja siirtää sen esimerkiksi viereiseen huoneeseen.

Verhotankoja, seinäkiinnikkeitä sekä verhoja on saatavilla useita eri värejä, joten niistä voi rakentaa haluamansa kokonaisuuden. Verhotankoja on useita eri pituuksia välillä 55 – 220cm.

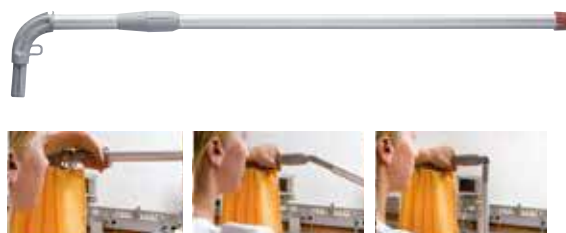

Ropimex-potilassermit

Ropimex-potilassermit ovat monikäyttöisiä tilanjakajia sairaaloihin ja hoivakoteihin. Niitä voidaan käyttää myös näköesteinä. Läpinäkymättömät mutta valoa läpäisevät paneelit luovat viihtyisän tunnelman. Sermit on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista, kuten anodisoidusta alumiinista ja naarmuuntumattomasta pleksilasista. Käytetyt materiaalit ovat paloturvallisia.

Ropimex-potilassermit taittuvat pieneen tilaan muutamassa sekunnissa tilan säästämiseksi. Helppo puhdistettavuus ja helposti vaihdettavat design-vaihtoehdot luovat miellyttävän ympäristön ja helpottavat henkilöstön työskentelyä. Sermien kokonaispituus voi olla maksimissaan 3 metriä eikä paneelien väliin jää rakoja.

Leikkauspöydät ja lisävarusteet





Myyty yli 30 maahan.

Kuva: Sairaala Neo

Scandia SC330 -leikkauspöytä

Sähköhydraulinen leikkauspöytä yleiskirurgiaan

Scandia on nykyaikainen elektrohydraulinen leikkauspöytä, jonka toiminnallisuus, muunneltavuus ja muotoilu ovat huippuluokkaa. Scandia-leikkauspöytä soveltuu kaikkiin kirurgisiin toimenpiteisiin. Scandia on helppokäyttöinen ja varma valinta leikkaussaliin pitkäaikaisena ratkaisuna. Modulaarinen pöytätaso on suunniteltu mukautumaan ihmisen kehon nivelrakennetta, joten pöytä antaa erinomaisen tuen kulloiseenkin kirurgiseen toimenpiteeseen.

*Erinomaista ergonomiaa -
monipuoliset säädöt ja helppo
muunneltavuus*



Tärkeimmät ominaisuudet

- 1 Kolmen kaksoispyörän ansiosta pöytä on helposti liikuteltava ja kääntyy paikallaan ympäri
- 2 Pienikokoinen käsiohjain, joka on käytettävissä yhdellä kädellä
- 3 6-osaisen makuutason sektiot ovat helposti vaihdettavissa eri toimenpiteiden vaatimusten mukaisesti

Tekniset ominaisuudet




Muut lisävarusteet

- Ajomoottori
- Tason pitkittäisiuku
- Langaton käsiohjain (Bluetooth)
- Hiilikuitutasot

Mittakuvat



1

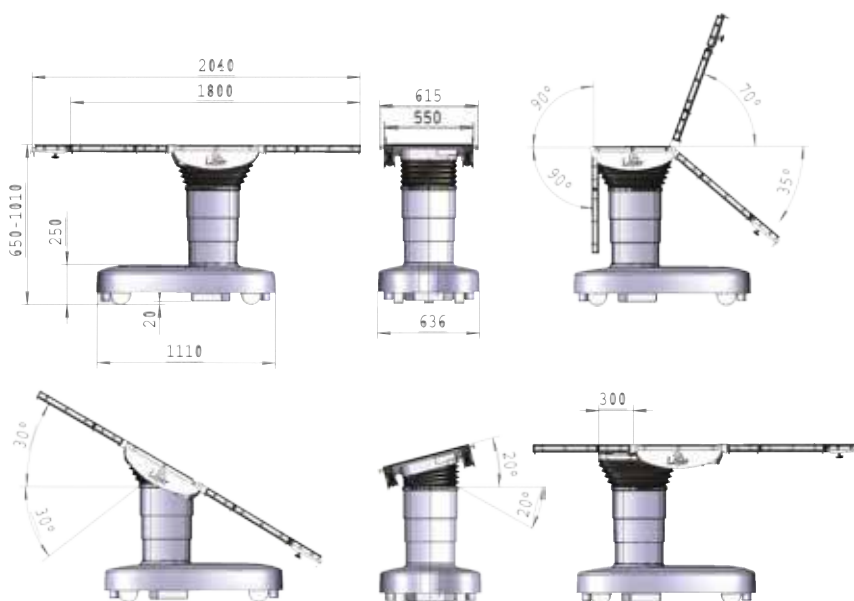

Leikkauspöytien lisävarusteet

Lojerin lisävarustevalikoima sopii useimpiin leikkauspöytämerkkeihin

Lojerin korkealuokkainen leikkaustasojen lisävarustevalikoima on suunniteltu täydentämään leikkaustasojen ominaisuuksia erilaisissa kirurgisissa toimenpiteissä. Kaikki lisävarusteissa käytetyt komponentit ja materiaalit ovat tarkasti valittuja ja laadukkaasti valmistettuja – Lojerilla on 30 vuoden kokemus leikkauspöydistä ja niiden varusteista. Lisävarusteiden kiinnittäminen on helppoa ja turvallista, jolloin säästät aikaa ja toimenpideprosessit tehostuvat. Lisävarusteiden tarkoituksenmukainen muotoilu takaa parhaan mukavuuden ja potilasturvallisuuden.



Esimerkkejä lisävarusteista

Valikoimamme laajenee jatkuvasti, parhaan ja viimeisimmän tiedon löydät:
www.lojer.com > terveydenhuolto > leikkauspöydän lisävarusteet

Tutkimus-,
toimenpide- ja
lukuvalaisimet



Tutkimus- ja toimenpidevalaisimet

Saksalainen Provitan valmistavat laadukkaat tutkimus-, toimenpide- ja lukuvalaisimet soveltuvat sekä tutkimushuoneisiin että potilaan sängyn viereen. Valaisimet voivat olla liikuteltavia tai ne voidaan kiinnittää seinään, tutkimuspöytään tai sänkyyn. Valaisimet ovat laajasti säädettäviä ja tarpeeksi jäykkiä, jotta ne voidaan asettaa haluttuun asentoon. Valaisimissa yhdistyy erinomaisella tavalla hienostunut teknologia ja moderni design. Suunnittelussa on keskitytty erityisesti valaisimien helppoon käsittelyyn ja turvallisuuteen. Kaikki valaisimet ovat medical-hyväksytyjä.



Tutkimus- ja toimenpidevalaisin Series 5

Korkeuden säätövara	noin 100 cm
Kääntösäde	noin 95 cm
Paino	noin 18 kg
Kytkin	4-portainen himmennin
Lampun väri	valkoinen
Valolähde	LED, 24V / 27W
Väriämpötila	noin 4500 K
Valaistusvoimakkuus	noin 70 000 lux / 100 cm
Valoalueen halkaisija, arvo D10	noin 170 mm / 1000 mm
Valovirta	840 lm
Värintoistoindeksi Ra	93
Punaisen valon värintoistoindeksi R9 >	90
Värintoistoindeksi (rho) R13 >	98
Käyttöikä	noin 30 000 h (valolähde)
Kokonais-teho	35 W
Jännite	120 – 240 V, 50 – 60 Hz
Valotehokkuus	31 lm / W
Voimakkuusvalinnat	50 % / 70 % / 90 %
Sähkölukitus	EN60601-1 (DIN VDE 0750 T1)
Kahva	steriloitavissa
Käyttötapa / IP-luokka	jatkuva / IP20
Suojausluokka	II / I (riippuu mallista)



Tutkimus- ja toimenpidevalaisin Series 1

Valaisimen väri	valkoinen
Toimintasäde	noin 80 cm
Paino	noin 10,6 kg
Nivel	Ø 18mm, pituus 35 mm
Jalustan materiaali	teräs, valkoinen pinnoite
Jalustan halkaisija	noin 63,5 cm
Pyörät	kaksoispyörät Ø 50mm EN 60601 mukainen maadoitus ja lukitus
Kulutuspinnan kovuus	100A Shore
Lisäominaisuudet	himmennin / kv-pistokkeet / 110V / värikorjaus (halogeeni)
Lampun väri	valkoinen
Valolähde	LED, 18V / 12W
Väriämpötila	4300 K ± 200 K
Valaistusvoimakkuus	> 50 000 lux / 50 cm noin 12 750 lux / 100 cm
Valoalueen halkaisija, arvo D10	100 / 160 mm, 500 / 1000 mm
Valovirta	160 lm
Värintoistoindeksi Ra	93
Punaisen valon värintoistoindeksi R9	90
Käyttöikä	> 30 000 h (valolähde)
Kytkin	valaisimen päällä
Jännite	100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Lisäominaisuudet	2-vaiheinen kytkin



Lukuvalaisin Series 4

Valaisimen väri	hopea
Kytkin	valaisimen päällä
Toimintasäde	noin 60 cm
Nivel	Ø 18mm, pituus 35 mm
Kokonaispituus	138cm
Opastusvalo	integroitu kytkimeen
Muuntaja	pistokemuuntaja
Käyttötapa	jatkuva
Lisäominaisuudet	kytkin johtoon
Valolähde	halogeenilamppu kylmäsädeheijastimella, 12V / 10W, 38°
Väriämpötila	3000 K
Valaistusvoimakkuus	noin 520 Lux / 50 cm
Käyttöikä	noin 2000 h (valolähde)
Jännite	230V, 50 – 60 Hz

Lojer Symbolit



Makuutason leveys
Tuotteen makuutason leveys



Makuutason pituus
Tuotteen makuutason pituus



SWL
Safe Working Load eli suurin sallittu kuormitettavuus mukaanlukien potilas, potjat ja lisävarusteet



Potilaspaino
Suurin sallittu potilaan paino



Korkeudensäätöalue
Tuotteen max. ja min. korkeus



Peruspyörän koko
Keskus- tai yksittäislukittavan peruspyörän halkaisija (mm)



Kaksoispyörän koko
Keskus- tai yksittäislukittavan kaksoispyörän halkaisija (mm). Kaksoispyörien tukevuus ja liikuttavuus on peruspyörää parempi.



5. pyörä
Sängyn keskellä on viides pyörä, jonka ansiosta sängyn liikuttavuus on merkittävästi parempi



Keskuslukitus
Tuotteessa on mekaaninen tai sähköinen keskuslukitus. Se on toteutettu lukkiutuvilla pyörillä tai vaihtoehtoisesti pyörien nostojärjestelmällä.



Toimintojen määrä
Tuotteen toimintojen määrä, esim. korkeuden ja selkäosan säätö (=2X)



Akkukäyttöinen
Tuotteessa on mahdollisuus akkuvarustukseen (yleensä lisävaruste).



Käsiohjoin
Tuotetta voidaan ohjata käsiohjaimen avulla



Hands free -korkeudensäätökehikko
Tuotetta voidaan korkeussäätää jalalla mistä tahansa suunnasta



Sähköinen jalkaohjoin
Tuotetta voidaan ohjata jalkaohjaimen avulla



Hydraulinen korkeussäätö
Tuotteen korkeutta säädetään jalalla pumpaamalla hydraulisylinteriä




Trendelenburg-säätö
Tuotteessa on Trendelenburg-säätö



Anti-Trendelenburg -säätö
Tuotteessa on Anti-Trendelenburg -säätö



CPR-hätälasku
Selkäosa voidaan laskea nopeasti ala-asentoon

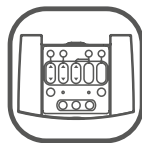

Hoitajapaneeli
Ylimääräisellä ohjauspaneelilla voidaan käyttää esiohjelmoituja toimintoja tai estää potilaalta tiettyjä toimintoja



Lisävarusteet
Tuotteeseen on saatavilla tehdasasenteisia optioita tai jälkikäteen asennettavia lisävarusteita.

SKAI®-verhoilut – kestävää, käytännöllistä ja näyttävää

Lojer-tuotteiden verhoiluissa käytetään korkealaatuista ja iholle miellyttävän tuntuista SKAI-keidonahkaverhoilua. Saksassa valmistettu SKAI-keidonahka täyttää terveydenhuollon materiaaleille asetetut vaatimukset ja on paloa ehkäisevä, kulutusta kestävä ja helposti puhdistettava.

Skai Fashion

Skai Fashion on korkealaatuinen keidonahkamateriaali. Materiaali tuntuu ja näyttää oikealta nahalta. Skai Fashion materiaali on pitkäikäinen ja helppo puhdistaa saippualla ja mikrokuituliinalla. Materiaali kestää mietoja desinfiointiaineita, mutta desinfioinnin jälkeen pinta tulee aina pyyhkiä puhtaalla, nihkeällä rätillä. Materiaali ei kestä liuottimia, klooripohjaisia tai hankaavia aineita eikä kemikaalista pesua tai kiillotusaineita. Materiaali on paloturvallinen (flame retardant).



kestävä



repeämätön



kulutusta kestävä



haalistumaton



helppo puhdistaa



BS5852 IS-0+1+5,
DIN4102 (Part 1, B1)
DIN4102 (Part 1, B2),
DIN53438 (Part 2)
EN1021-1+2, MVSS302,
NF M2



snow white



grape+



platin



graphite



ocean



sky



river



aqua



lime+



citron



mango



chili



perle



schoko



espresso+



schwarz

Skai Clinica

Skai Clinica on korkealaatuinen keinomateriaali. Sen pinta on miellyttävän sileä ja erittäin kiiltävä. Materiaali on antibakteerinen (JIS Z 2801) ja kestää eritteitä, joten se on erittäin suositeltavaa lääkinnällisiin käyttöympäristöihin. Materiaali on myös bioyh- teensopivuutensa (EN ISO 10993-5) ansiosta turvallinen iholle. Se kestää hyvin kulutusta, joten sen käyttö on suositeltavaa myös hieronta- ja wellnesskäytössä.



perle clinica



river clinica



platin clinica



kestävä



repeämätön



desinfiointiaineita
kestävä



kulutusta kestävä



antibakteerinen



haalistumaton



helppo puhdistaa



eritteitä kestävä



öljyn ja rasvan
kestävä



bioyh-teensopiva



NF M2,
BS5852 IS-0+1,
EN1021-1+2,
DIN4102 (Part 1, B2),
MVSS302,
DIN53438 (Part 2)

Skai Conductive

Skai Conductive on korkealaatuinen keino nahkamateriaali. Materiaali tuntuu ja näyttää oikealta nahalta. Lisäksi materiaali johtaa sähköä, joten sen käyttö on suositeltavaa kohteissa, joissa tulee välttää sähköstaattisia purkauksia (esim. sydämen toimintaan liittyvät tutkimukset). Skai Conductive materiaali on pitkäikäinen ja helppo puhdistaa saippualla ja mikrokiutuliinalla.



mano



kestävä



repeämätön



desinfiointiaineita
kestävä



sähköä johtava



haalistumaton



helppo puhdistaa



HOITO- JA SAIRAALAKALUSTEET
Toimipisteet: Espoo, Kempele, Hollola, Sastamala
Puh. 010 830 6700
myynti@lojer.com
www.lojer.com

