


Scandia 310H hydraulinen leikkauspöytä

Moderni hydraulinen leikkauspöytä yleiskirurgiaan

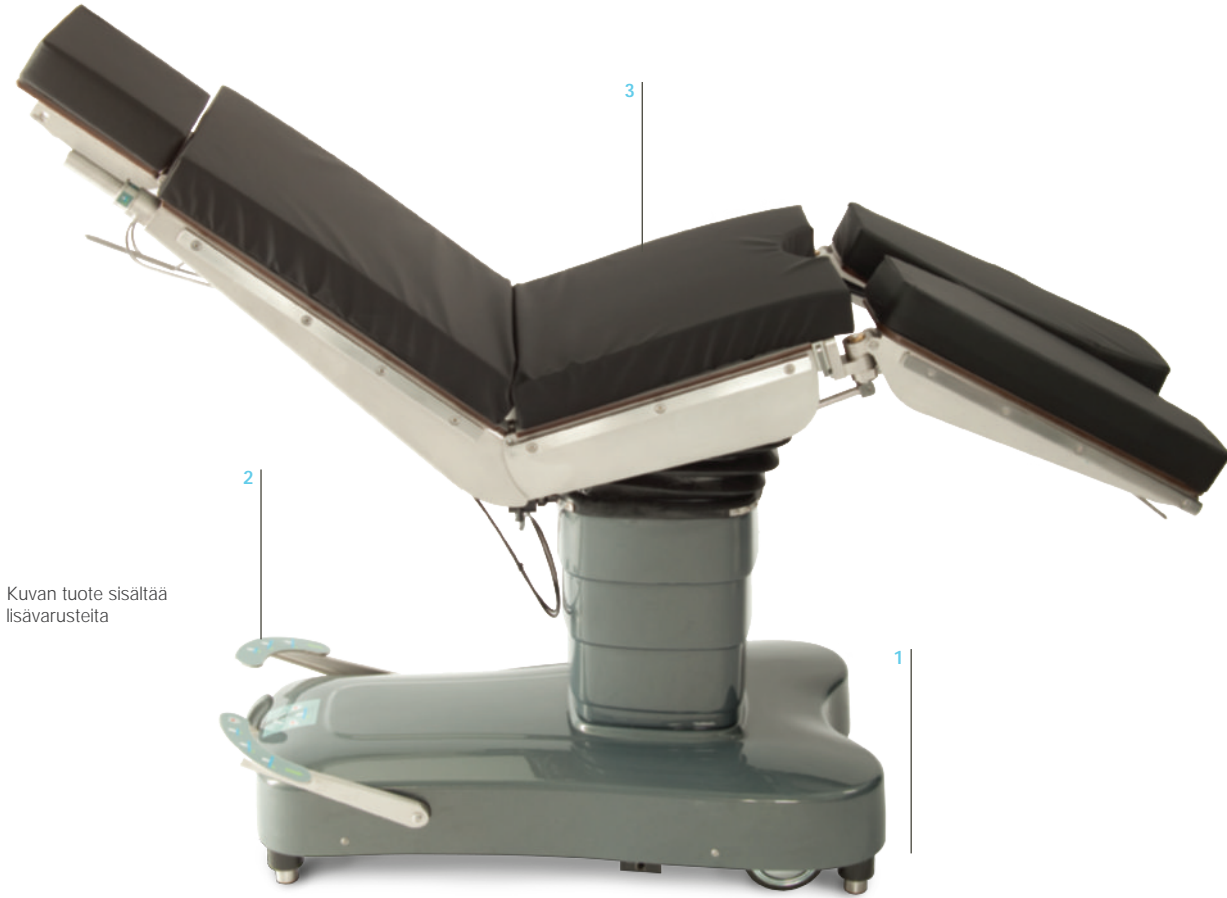

Tärkeimmät ominaisuudet:

1. Neljä pöydän kulmiin sijoitettua hydraulista jalkaa takaavat tukevan asemoinnin leikkauksen ajaksi
2. Hydrauliset toiminnot valitaan käsikahvalla, minkä jälkeen haluttu asento pumpataan jalkapolkimella
3. Ergonominen skandinaavinen muotoilu ja kevyt liikuteltavuus

Scandia 310H on moderni hydraulinen leikkaustaso yleiskirurgiaan. Sen toiminnallisuus ja muunneltavuus ovat huippuluokkaa, ja Scandia 310H tarjoaakin ominaisuuksia joita hydraulisissa leikkauspöydissä harvemmin nähdään. Leikkaustasossa on vakiona kapea pääosa, selkäosa sekä jaettu tai yksiosainen jalkaosaa. Selkä- ja jalkaosat ovat kaasujousikevenneiset.

Pöydän hydrauliset toiminnot valitaan käteväällä käsikahvalla, jonka jälkeen haluttu asento pumpataan jalkapolkimella. Leikkauksen ajaksi pöytä nostetaan hydraulisesti neljälle jalalle, joten se saadaan asemoitua erittäin tukevasti. Kokonaisuuden täydentää optiona saatava pitkittäissuuntaan liukuva makuutaso (slide), joka mahdollistaa esimerkiksi maksimaalisen C-kaarikuvaamisen.

Scandia 310H leikkauspöytään on saatavilla kymmeniä korkealaatuisia Lojer-lisävarusteita, jotka on suunniteltu täydentämään leikkaustasojen ominaisuuksia erilaisissa kirurgisissa toimenpiteissä.

LOJER® For easy care



| Tekniset tiedot ja ominaisuudet | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Kokonaispituus (pääosalla) | 2170 mm |
| Leveys | 550 mm (615 mm sivukiskojen kanssa) |
| Safe Working Load (SWL) | 170 kg |
| Maksimi nostokapasiteetti | 300 kg |
| Pyörät | Ø125 / 150 mm |
| Paino | 240 kg |
| Hydraulinen korkeudensäätö (ilman patjaa) | 670 - 1030 mm |
| Hydraulinen Trendelenburg / anti-Trendelenburg | 28° / 30° |
| Hydraulinen sivukallistus | 20° / 20° |
| Kaasujousiavusteinen selkäosa (ylös/alas) | 65° / 30° |
| Kaasujousiavusteinen jalkaosa (ylös/alas), irrotettava | 16° / 85° |
| Pääosa (ylös/alas), irrotettava | 40° / 40° |
| CE-merkintä | Kyllä |
| Takuu | 2 vuotta |
| Valmistusmaa | Suomi |

Tehdasasenteiset optiot ja lisävarusteet:

- Laaja valikoima erilaisia lisävarusteita (katso Leikkauspöydän lisävarusteet -esite)



LOJER® For easy care

© Lojer Group 2019. All Rights reserved | Lojer Group, Putajantie 42, 38210 Sastamala | Tel. + 358 (0) 10 830 6700 | myynti@lojer.com | www.lojer.com

Lojer-konsernin tarina sai alkunsa vuonna 1919, kun peltiseppä Niilo Ranni perusti Vammalan Konepajan. Aluksi konepajassa korjattiin muun muassa lastenrattaita. Nykyään yhtiö on Pohjoismaiden suurin sairaala- ja hoitokalusteiden valmistaja ja tuotteitamme on käytössä 115 maassa.

