



Ortopedinen lisälaitte ortopedisiin ja traumatologisiin leikkauksiin.
Koodi 60290.



Jalkateline (varsi Ø20 mm).
Koodi 61120110.



Lukko (Ø20 mm) ortopedisen lisälaitteen
varusteille.



Vinoveto-laite ortopediseen lisälaitteeseen
(varsi Ø20 mm). Koodi 60291.



Ortopedisen lisälaitteen sivukisko.
Koodi ES15334.



Scandia-jalkaohjain, kolme ohjelmoitavaa
toimintoa. Koodi 60270.

SCANDIATM

LEIKKAUSPÖYTÄ

LISÄVARUSTEET



SCANDIATM

LEIKKAUSPÖYTÄ

LISÄVARUSTEET

Lojerin korkealuokkainen leikkauspöytien lisävarustevalikoima on suunniteltu täydentämään leikkauspöytien ominaisuuksia erilaisissa kirurgisissa toimenpiteissä. Kaikki lisävarusteissa käytetyt komponentit ja materiaalit ovat tarkasti valittuja ja laadukkaasti valmistettuja, onhan Lojerilla 25 vuoden kokemus leikkauspöydistä ja niiden varusteista. Valikoimamme myös laajenee jatkuvasti. Lisävarusteiden kiinnittäminen on helppoa ja turvallista, jolloin säästät aikaa ja toimenpideprosessit tehostuvat. Lisävarusteiden tarkoituksenmukainen muotoilu takaa parhaan mukavuuden ja potilasturvallisuuden. Sivukiskoihin (10 x 25 mm) kiinnitettävät lisävarusteet sopivat myös muiden valmistajien leikkauspöytiin, kysy lisää myynnistämme!



LEIKKAUSPÖYTIEN SEKTIOT JA PATJAT

PÄÄOSAT	25-SEKTIOT	40-SEKTIOT	GYNEKOLOGISET SEKTIOT	JALKAOSAT	PATJASARJAT
OT15498 Kaksoistaittuva pääosa	OT14030 25-sektio naaras/naaras	OT14014 40-sektio uros/naaras	OT14033 Gynekologinen/ urologinen 25-sektio naaras/naaras	60160 Jaettu jalkaosa (pari)	60180 Lämpömuovautuva 75mm patjasarja SC330-pöydälle, 6 sektiota
14843 Pääosan patja 75mm, lämpö- muovautuva	OT18189 25-sektio naaras/naaras/uros	OT18186 40-sektio naaras/naaras, ei sisällä patjaa	60150 Gynekologinen/ urologinen 40-sektio naaras/naaras	60164 Jaetun jalkaosan patja 75mm (pari), lämpö- muovautuva	60180-5 Valettu 65mm patjasarja SC330- pöydälle, 6 sektiota
16818 Pääosan patja 65mm, valettu	OT18185 25-sektio uros/uros	14460 40-sektion patja 75mm, lämpömuo- vautuva	60155 40-sektion patja 75mm gyneaukolla, lämpö- muovautuva	60163 Jaetun jalkaosan patja 65mm (pari), valettu	60195 Lämpömuovautuva 75mm patjasarja 310H-pöydälle, 4 sektiota sisältäen 1-osaisen jalkaosan
60110 Erikoispäätukien adapteri (vain SC330)	14461 25-sektion patja 75mm, lämpömuo- vautuva	16815 40-sektion patja 65mm, valettu	14463 25-sektion patja 75mm gyneaukolla, lämpö- muovautuva	60161 Taittuva 2-osainen jalkaosa (pari), sisältää 75mm lämpömuovautuvat patjat	60183 Valettu 65mm patjasarja 310H-pöydälle, 4 sektiota sis. 1-osaisen jalkaosan
	16816 25-sektion patja 65 mm, valettu		16818 25-sektion patja 65mm gyneaukolla, valettu	60140 Kevyt jalkaosa. Pituus 820mm, paino vain 6 kg.	60196 Lämpömuovautuva 75mm patjasarja 310H-pöydälle, 5 sektiota sisältäen jaetun jalkaosan
				60145 Kevyen jalkaosan patja 75mm, lämpömuovautuva	60184 Valettu 65mm patjasarja 310H-pöydälle, 5 sektiota sisältäen jaetun jalkaosan

SCANDIA PATJAT

Lämpömuovautuvissa Scandia -patjoissa on ainutlaatuinen kaksikerroksinen rakenne, jossa päällimmäisenä oleva viskoelastinen kerros muotoutuu potilaan kehon paineen ja lämmön mukaan. Scandia patjat ovat testattu niiden johtavuuden, nesteiden läpäisevyyden (infektiokontrolli), syttyvyyden ja niiden esteettisten ominaisuuksien osalta. Patjat ovat antistaattisia ultraäänisaumattuja ja ne kiinnitetään tarranauhalla (velcro) pöytätasoon. Paksuus 75 tai 120 mm.

Scandia-leikkauspöytään on saatavilla myös valettu polyuretaaninen patjasarja. Patjoissa ei ole saumoja tai niveliä, joten ne on helppo puhdistaa ja desinfioida. Patjat antavat erinomaisen tuen leikkaukseen, ja ne ovat paloa ehkäiseviä, lateksittomia ja anti-staattisia. Patjojen paksuus on 65mm, ja niissä on valinnan mukaan velcro- tai nastakiinnitys.

TUET JA HIHNAT



Pehmustettu jalka- ja vartalohihna, leveä. Koodi 10464



Pehmustettu hihna pohjetukiin, koodi 10452.



Rannelukko hihnalla, sis. kiskolukon. Koodi 10370.

PÄÄTUET



Adapteri erikoispäätukiin, Mayfield® yhteensopiva. Koodi 60110.



Säädettävä päätuki ENT-, plastiikka ja silmäkirurgiaan. Koodi 60327. Vaatii adapterin 60110.



Neurokirurginen päätuki, koodi 6010335. Vaatii adapterin 60110.



Pyöreä päätuki, koodi 10333.



Photo: Hospital NEO, Finland

MUUT LISÄVARUSTEET



Laminektomia laite, käsisäätöinen. Koodi 6010485.



Uro-catcher-järjestelmä mahdollistaa nesteiden ohjaamisen kertakäyttöiseen pussiin. Joustava puolipyörän muotoinen kehys mahdollistaa kirurgin pääsyn hyvin lähelle potilasta. Lateksitommassa pussissa on integroitu kudosten keruu ja viemärointi. Uro-catcher koodi 60324 ja steerilit pussi (10 kpl) koodi 60235.



Munuaishissi, käsisäätöinen. Koodi 6010480. Sopii useille leikkauspöytämerkeille, säädettävä leveys 490-550mm.



Viemäroity malja, tilavuus 9 litraa. Sis. kiskolukot. Koodi 60335.



Rtg-kasettiteline, sopii kaseteille max 465 x 390 mm. Koodi 60116.



Proktologia-laite, koodi 6010440F. Korkeussäätö 490-690mm, swl 200kg.

JALKATUET



3D jalkatuett, joiden ainutlaatuinen kaasujousirakenne mahdollistaa jalan liikuttamisen kevyesti ja tarkasti. Puristuskahva mahdollistaa litotomian ja loitontamisen steriilillä alueella. Lämpömuovautuvat comfort-pehmusteet. SWL 160kg. Koodi 60320. Vaatii kiskolukot 60200.



Säädettävät pallonivelöidyt jalkatuett (varsi Ø20mm), koodi 10450. Vaatii lukot 61383. Lisävarusteena tarrahihna.



Artroskopiset jalkatuett, koodi 6128920. Vaatii lukon 61264/61283.

ANESTESIAKAARET JA NESTEENANTOTELINEET



Anestesiakaari, sis. kiskolukot.
Koodi 10310. Lisävarusteena
jatkovarsi 60328.



Joustava anestesiakaari, sis. kiskolukot.
Koodi 10311.



Nesteenantoteline Ø18mm yhden käden säädöllä, ruostu-
matonta terästä. Koodi 60120. Vaatii lukon 60264.
Taittuva nesteenantoteline yhden käden säädöllä, sis. kisko-
lукon Koodi 60125.



KISKOLUKOT



Kulmasäädettävä kiskolukko Ø20 mm
varsille, ruostumatonta terästä. Koodi 61283.



Pikalukko, alumiinia. Ø18 mm: koodi: 60264
Ø20 mm: koodi: 61264



Easy lock -pikakiinnityslukko litteällä varrella
oleviin lisävarusteisiin. Koodi 60200.

KÄSITUET JA KÄSILEIKKAUSPÖYDÄT



Käsituki yhden käden säädöllä, sis. kiskolukon
mutta ei pehmustetta. Koodi 10380.
Mallissa 6010387 lisäksi kulmasäätö.



Rtg-säteitä läpäisevä käsituki, sis. kiskolukon
mutta ei pehmustetta. Koodi 10385.



Comfort-pehmustepatja käsitukiin.
Koodi 10382H.



Valettu patja käsitukiin (kovera).
Koodi 10382.



Käsileikkauspöytä, sis. kiskolukot ja yhden
säädettävän tukijalan. Koodi 10390. Saatavana
myös hiilikuituisena.



Monikäyttöinen pallonivelöity käsiteline, jossa
soft -pehmuste. Pituussäätö 150mm, varsi
Ø18mm. Koodi 60322.

KÄSITUET JA KÄSILEIKKAUSPÖYDÄT



Makuutason levennysosa 500 mm (pari, sis.
patjat). Koodi 10423. Saatavilla myös 240 mm
pituuisena.



Lateraalituki (varsi Ø20 mm), leveä. Koodi 51461416
Lateraalituki (varsi Ø20 mm), kapea. Koodi 61406
Molemmat vaativat lukon 61264/61283.



Lateraalituki, jossa pyöreä pallonivelöity ja
lämpömuovautuva pehmuste. Koodi 603211.
Vaatii lukon 60200.



Lateraalituki, jossa neliskanttinen pallonivelöity
ja lämpömuovautuva pehmuste. Koodi 603212.
Vaatii lukon 60200.



Vertikaalinen tukirulla (varsi Ø20 mm).
Koodi: 61421. Vaatii lukon 61264/61283.




Horisontaalinen tukirulla (varsi Ø20 mm).
Koodi: 10369. Vaatii lukon 61264/61283.



Olkatuet, pari. Koodi 61253. Vaatii lukot
61264/61283.



Jalkatuet, pari. SWL 250kg. Koodi 7510175.
Vaatii lukot 61264/61283.

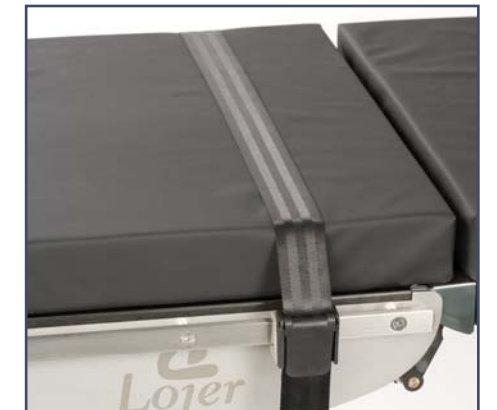

Jalkahihna, sis. kiskolukot. Koodi 10372.

OLKALEIKKAUSLAITE



Kolmiosainen olkaleikkauslaite kiinnitetään
leikkauspöydän 25-sektioon. Säädettävä pääteline,
jossa muovautuvat pehmusteet. Koodi 60280-2.



Sivutuki olkaleikkauksilaitteeseen.
Koodi 602801.



Lisävaruste-vaunu leikkaspöytien varusteille.
Koodi 60250.