

# Undersökningsbänk Lojer 4040X

Innovativ och mångsidig tvådelad elektrisk undersökningsbänk



Viktiga egenskaper:

1. Marknadens bästa höjdomfång 40 – 95 cm
2. Genomtänkt design och konstruktion gör bänken lätt att använda, underhålla och rengöra
3. Sänkning med hjälp av tyngdkraften förbättrar patient- och användarsäkerhet

Helt nya 4040X från Lojer är ett utmärkt val av undersökningsbänk för de flesta kliniker och mottagningar inom hälsovården. Tack vare den patenterade konstruktionen med unika egenskaper och ett stort höjdomfång kan både barn, vuxna och äldre smidigt ta sig på och av bänken.

4040X är baserad på helt ny teknik som möjliggör både manuell och elektrisk justering av ryggdelen. Den höga belastningskapaciteten möjliggör en bra ergonomisk arbetsställning samtidigt som patientsäkerheten i undersöknings- och förflyttningssituationer garanteras.

Dynornas stoppning ger god komfort och behåller formen över tid. Det erbjuds många individuella valmöjligheter på bredd, färg och klädselkvalité.

Bänken utrustas som standard med pappersrullehållare och uttag för tillbehörsadapter (6 valbara positioner). Som tillval, för förbättrade ergonomi och hygien, kan bänkhöjden på 4040X enkelt justeras från bägge sidor med hjälp av fotstänger. Naturligtvis kan 4040X fås med Trendelenburg, centrallås och dubbelhjul. I tillägg erbjuds ett stort antal tillbehör.

**LOJER**® *For easy care*


| Teknisk specifikation   |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Totalbredd              | 75 cm (80 / 90 cm som tillval)                           |
| Totallängd              | 200 cm                                                   |
| Totalvikt               | 108 kg                                                   |
| Höjdjustering           | 40 - 95 cm                                               |
| Längd ryggdel           | 70 cm                                                    |
| Justering av ryggdel    | 0-73°                                                    |
| Trendelenburg (tillval) | max. 12°                                                 |
| Hjul diameter           | Ø125 mm (dubbelhjul som tillval)                         |
| Max. belastning (SWL)   | 210 kg                                                   |
| Elsystem                | 24V                                                      |
| CE - MDD                | Ja                                                       |
| Handkontroll            | Ja                                                       |
| Tillverkningsland       | Finland                                                  |
| Garanti                 | 10 år ram, 2 år motor/elektronik/hydraulik, 1 år klädsel |

#### Fabriksmonterade tillval:

- Fotstänger för justering av höjd och rygg
- Trendelenburg
- Batteridrivnen
- Ø125 mm dubbelhjul med centrallås

#### Tillbehör:

- Grindar
- Droppställning
- Armstöd
- Nackstöd
- Undersökningsbelysning
- Handtag för förflyttning
- Adapter för extrautrustning
- Antistatisk klädsel
- Tillbehörsskena 380 mm x 10 mm x 25 mm (max 6 st.)
- Anestesibåge

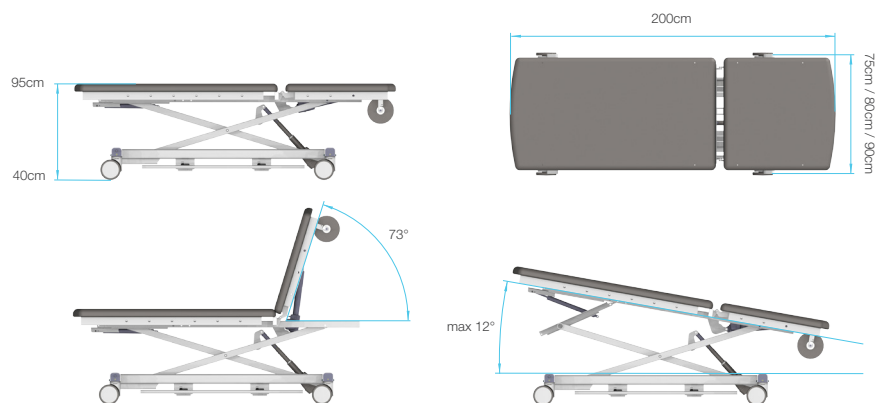

Titta på videon  
<http://bit.ly/4040x>

**LOJER**® *For easy care*

Distributör: Medema Physio AB Tel. 08 404 1200 | [info@medema.se](mailto:info@medema.se)  
[www.lojer.com](http://www.lojer.com) | [www.medema.se](http://www.medema.se)