

4050X Gynekologinen yleistutkimuspöytä

Helppokäyttöinen korkean hygienian tutkimuspöytä moniin käyttötarkoituksiin



Tärkeimmät ominaisuudet:

1. Helppo säätää käyttämättä käsiä, mikä tekee henkilöstön työstä hygieenisempää ja tehokkaampaa
2. Pöytä on suunniteltu erityisesti gynekologisiin tutkimuksiin, mutta se sopii hyvin myös pieniin toimenpiteisiin ja yleistutkimukseen
3. Uusia ominaisuuksia, jotka parantavat käytettävyyttä, mukavuutta ja potilasturvallisuutta

4050X Gynekologinen tutkimuspöytä on valikoimamme monipuolisin tutkimuspöytä. Se sopii erityisen hyvin gynekologisiin tutkimuksiin, mutta sitä voidaan käyttää myös pienissä toimenpiteissä ja yleistutkimuksissa. 4050X Gynekologisessa tutkimuspöydässä on kolmiosainen makuutaso istuin-, keski- ja selkäosien säädöillä. Istuinta, keskiosaa ja korkeutta voidaan säätää pöydän edestä käyttämällä uutta gynekologista jalkaohjainta, mikä tekee terveydenhuollon henkilöstön työstä hygieenisempää ja tehokkaampaa. Lisävarusteena pöytään voidaan lisätä kaksiosainen handsfree-tanko pöydän sivuun tai käyttää käsiohjainta, joka on vakio-ominaisuus.

Uuden hygieniää parantavan gynekologisen jalkaohjaimen lisäksi tutkimuspöydän verhoilumateriaali on erittäin kestävä korkean hygienian kangasta, joka on helppo puhdistaa, se on vedenpitävää ja lisäksi sillä on erinomaiset desinfiointiominaisuudet. 4050X on varustettu säädettävillä kantapäätuilla (portaaton säätö ilman vipuja) ja gynekologisella maljalla, joka on helppo siirtää pois tieltä, kun sitä ei tarvita. 4050X:n moottorit laskevat painovoiman avulla, ja hätätilanteissa pöytä nousee automaattisesti jos jotain jää mekanismin väliin.

Saatavana on kaksi eri mallia: 4050X M -tutkimuspöydässä on pienempi määrä ominaisuuksia, kun taas 4050X F on laajemmin varustettu - siinä on esimerkiksi muistipaikallinen käsiohjin, sähköinen istuimen säätö ja uusi gynekologinen jalkaohjain. Tarkemman erittelyn malleista voi katsoa teknisistä tiedoista ja ominaisuuksista.

LOJER® For easy care


Tekniset tiedot ja ominaisuudet	4050X F	4050X M
Kokonaisleveys	70 cm	70 cm
Kokonaispituus	200 cm	200 cm
Kokonaispaino	120 kg	120 kg
Korkeuden säätöalue	49 - 97 cm	49 - 97 cm
Selkäosan pituus	70 cm	70 cm
Selkäosan säätö	0 - 73°, sähköinen	0 - 73°, sähköinen
Keskiosan pituus	82 cm	82 cm
Keskiosan säätö	0 - 73°, sähköinen	0 - 73°, kaasujousi
Istuinosan pituus	39 cm	39 cm
Istuinosan säätö	0 - 25°, sähköinen	Ei säädettävissä
Trendelenburg / anti-Trendelenburg (optio)	20° / -10°	20° / -10°
Pyörät	Ø125 mm yksittäislukittavat	Ø125 mm yksittäislukittavat
Muut vakio-ominaisuudet	Käsiohjain muistipaikalla ja pöydän eri osien samanaikaisella liikkumisella gynekologinen jalkaohjain korkeuden ja istuin- sekä keskiosan säätämiseen portaattomasti säädettävät kantapäätuet gynemalja lisävarustekiskot istuinosassa paperirullateline ja -leikkuri turvaominaisuus: istuin- ja keskiosan välinen kulma min. 105° turvaominaisuus: automaattinen pöydän nousu hätätilanteissa turvaominaisuus: pöydän lukitus gynekologisella jalkaohjaimella (painamalla kahta poljinta 3 sek)	Käsiohjain portaattomasti säädettävät kantapäätuet gynemalja lisävarustekiskot istuinosassa paperirullateline ja -leikkuri turvallisuusominaisuus: automaattinen pöydän nousu hätätilanteissa
Verhoilu	Useita materiaali- ja väri vaihtoehtoja, kysy lisätietoa	Useita materiaali- ja väri vaihtoehtoja, kysy lisätietoa
Kuormitettavuus (SWL)	210 kg	210 kg
Sähköjärjestelmä	24V	24V
CE -merkintä	Kyllä	Kyllä
Valmistusmaa	Suomi	Suomi

Options

- Trendelenburg / anti-Trendelenburg
- Keskuslukittavat pyörät Ø125 or Ø150 mm
- Keskuslukittavat sähköä johtavat kaksoispyörät Ø 150 mm
- Kaksiosainen handsfree-tanko
- Jalkaohjain
- Akku

Accessories

- Pohjetukipari
- Nesteenantoteline: suora, taivutettu tai antimikrobisella pinnoitteella
- Lisävarustekisko
- Lisävarustekisko, messinki
- Pikalukko Ø 20 mm
- Sivukaide, 1 tai 2 osaa
- Sivukaide, 1 tai 2 osaa, antimikrobinen pinnoite
- Anestesiakaari
- Työntökahvat
- Tutkimusvalaisin (kiinnitys lisävarustekiskoon tai runkoon)
- Niskatyyny
- Käsituki näytteenottoon

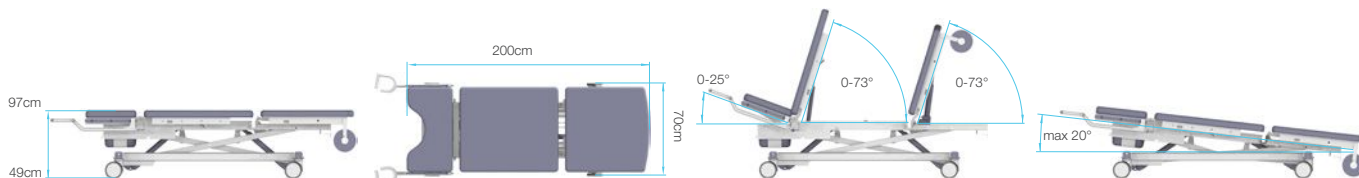

LOJER® For easy care