

# Bobath XB Mattohoitopöytä

Tukeva hoitopöytä neurologiseen kuntoutukseen



Tärkeimmät ominaisuudet:

1. Erittäin korkea kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) 400 kg
2. Patentoitu rakenne, joka tekee pöydästä tukevan ja erittäin kestävä
3. Potilasnosturi mahtuu helposti pöydän alle - myös kun pöytä on alakorkeudessaan (40cm)

Uudistettu Bobath-mattohoitopöytä on suunniteltu ensisijaisesti neurologiseen terapiaan ja Bobath-terapiaan. Patentoitu rakenne tekee pöydästä erittäin tukevan ja sopivan myös vaativaan käyttöön. Bobath-mattohoitopöytä on suunniteltu siten, että terapeutti voi olla pöydällä samanaikaisesti hoidettavan potilaan kanssa - kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) on jopa hämmästyttävä 400 kg.


Makuutaso on erittäin korkealuokkaisesti verhoiltu ja tason sivureunat on vahvistettu muovisella reunuksella. Verhoilu-materiaali on erittäin kestävä korkean hygienian kangasta, joka on helppo puhdistaa, se on vedenpitävää ja lisäksi sillä on erinomaiset desinfiointiominaisuudet. Makuutason pehmusteen paksuus on 30 mm, joka tekee tason pinnasta vähemmän joustavan, mutta paremmin sopivan neurologiseen tutkimukseen ja hoitoihin. Bobathin patentoidun runkorakenteen johdosta potilasnosturit mahtuvat helposti pöydän alle (maavara on 15 cm), vaikka pöytä olisi alakorkeudessa. Erittäin matalan alakorkeuden ansiosta (40 cm) myös pyörätuolia käyttävät potilaat pääsevät pöydälle helposti.

Saatavana on kaksi mallia: 4010XB:ssä on yksiosainen makuutaso ja 4020XB:ssä kaksiosainen makuutaso säädettävällä selkäosalla. Molemmat mallit voidaan varustaa valinnaisella kasvoaukolla potilasmukavuuden lisäämiseksi.

**LOJER**® For easy care

## Tekniset tiedot ja ominaisuudet

Malli	4010XB	4020XB
Makuutaso	Yksiosainen	Kaksiosainen
Kokonaisleveys	100 cm tai 120 cm	100 cm tai 120 cm
Kokonaispituus	200 cm	200 cm
Kokonaispituus kasvoaukolla (optio)	207 cm	207 cm
Kokonaispaino	145 kg	145 kg
Korkeuden säätöalue	40 - 95 cm	40 - 95 cm
Selkäosan pituus	-	70 cm
Selkäosan säätö	-	0 - 73°
Trendelenburg / anti-Trendelenburg (optio)	20° / 20°	20° / 20°
Pyörät	Ø 150 mm keskuslukittavat kaksoispyörät	Ø 150 mm keskuslukittavat kaksoispyörät
Muut vakio-ominaisuudet	Muovisella reunuksella vahvistetut makuutason reunat   käsiohjain turvalukitustoiminnolla (painamalla kahta nappia 3 sek)   turvaominaisuus: automaattinen pöydän nousu hätätilanteissa	Muovisella reunuksella vahvistetut makuutason reunat   käsiohjain turvalukitustoiminnolla (painamalla kahta nappia 3 sek)   turvaominaisuus: automaattinen pöydän nousu hätätilanteissa
Verhoilu	Useita materiaali- ja väri vaihtoehtoja, kysy lisätietoa	Useita materiaali- ja väri vaihtoehtoja, kysy lisätietoa
Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL)	400 kg	400 kg
Maavara	15 cm	15 cm
Sähköjärjestelmä	24V	24V
CE -merkintä	Kyllä	Kyllä
Takuu	2 vuotta	2 vuotta
Valmistusmaa	Suomi	Suomi

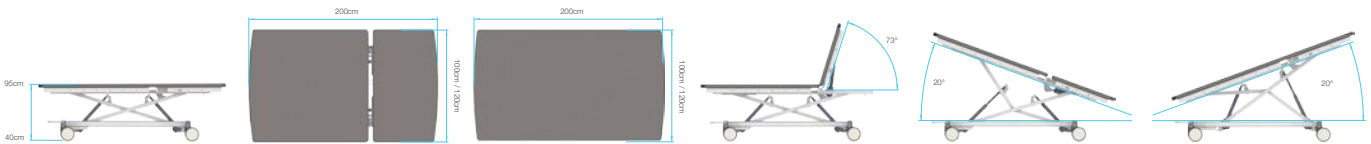

### Tehdasasenteiset optiot:

- Trendelenburg / anti-Trendelenburg (sis. akku)
- Jalkaohjain
- Kasvoaukko
- Akku

### Muut lisävarusteet:

- Lisävarustekisko
- Nousutuki
- Työntökahvat
- Tutkimusvalaisin
- Sivukaiteet

