


# Modux kokoontaittuva hoitosänky

Säästöä ajankäytössä, logistiikkakustannuksissa ja tilassa



1 Valmis käytettäväksi muutamassa minuutissa - ilman työkaluja

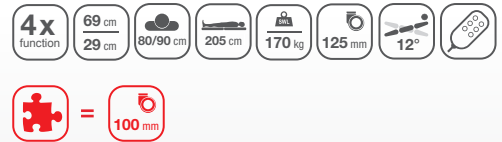

Tärkeimmät ominaisuudet:

1. Varastoinnin tilatarve on pieni (kuljetus- ja säilytysasento 60 cm x 90/100 cm)
2. Sähköisesti kokoontaitettava nappia painamalla ilman työkaluja
3. Saatavilla sekä 80 cm että 90 cm leveänä

Patentoitu Modux-hoitosänky on kotimainen innovaatio, ja maailman ensimmäinen kokoontaittuva potilasvuode. Modux taittuu nopeasti ja vaivattomasti ilman työkaluja kuljetus- ja säilytysasentoon, ja soveltuu siten erinomaisesti kotihoitoon ja esimerkiksi apuvälineyksiköiden kotihoitosängyksi.

Kuljetusasennossa sänky on mitoiltaan vain 60 x 90 cm, joten yksi henkilö pystyy kuljettamaan sen autossa, pienellä hissillä ja ahtaista oviaukoista. Sänky avautuu käyttöasentoon ja menee kasaan omalla moottorilla nappia painamalla parissa minuutissa ilman työkaluja. Modux tarjoaa siten merkittäviä elinkaarisäästöjä kaikkiin muihin sänkyvaihtoehtoihin verrattuna – siksi se onkin Suomen myydyin apuvälinesänky.

Vaikka sängyn siirtäminen on helppoa, Moduxissa on täysin samat ominaisuudet kuin muissakin hoitosängyissä, ja alin alakorkeus on vain 27 cm. Sängyn saa myös ns. rantatuoliasentoon.

**LOJER**® For easy care


Tekniset tiedot ja ominaisuudet	
Mitat kuljetusasennossa	60 x 90 cm
Kokonaisleveys kaiteilla	90 tai 100 cm
Kokonaispituus	222 cm
Korkeuden säätöalue	29 - 69 cm (125 mm vakiopyörät)   27 - 67 cm (100 mm pyörät)
Suosittelava patjakoko	205 x 78/88 x 13 cm
Kokonaispaino:	92 kg / 96 kg
Pyörät:	Ø125 mm yksittäislukittavat
Kuormitettavuus (SWL):	170 kg
Sähköjärjestelmä	24V
Selkäosan säätö	70°
Reisiosan säätö	40°
Pohjeosan säätö	24°
Anti-Trendelenburg	12°
Muut vakio-ominaisuudet	Käsiohjain   massiivipuiset päädyt ja kaksoislukitteiset laidat lukitusnapilla 2kpl   integroitu paikka kohottautumistelineelle
CE -merkintä	Kyllä
Valmistusmaa	Suomi

#### Tehdasasenteiset optiot:

- Ø100 mm yksittäislukittavat pyörät

#### Muut lisävarusteet:

- Kohottautumisteline
- Nousutuki
- Nesteenantoteline yhden käden pikasäädöllä
- Luku- ja ruokailutaso sängyn laitojen päälle
- Lukuvalaisin
- Pehmustettu kaidesuoja

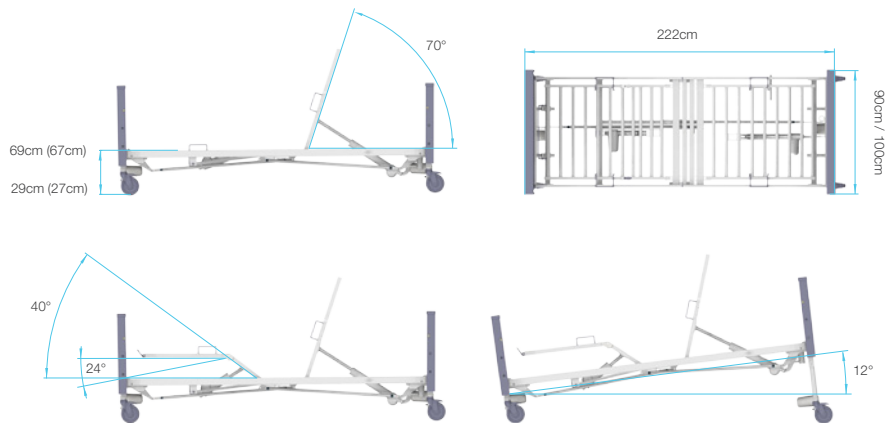

Katso video Modux-sängystä:  
<http://bit.ly/moduxvuode>



**LOJER**® For easy care

© Lojer Group 2020. Kaikki oikeudet pidätetään | Lojer Group, Putajantie 42, 38210 Sastamala | Tel. + 358 10 830 6700 | myynti@lojer.com | www.lojer.com

Lojer-konsernin tarina sai alkunsa vuonna 1919, kun peltiseppä Niilo Ranni perusti Vammalan Konepajan. Aluksi konepajassa korjattiin muun muassa lastenrattaita. Nykyään yhtiö on Pohjoismaiden suurin sairaalalalusteiden valmistaja ja tuotteitamme on käytössä 115 maassa

FIN\_05/20