



| Tuotekortti |

MERIVAARA LASTEN PATJAT

Hygieniapatja

Vauvan ja Junior-patjat

902 / 905 / 908

Käyttökohde


- Hyviä peruspatjoja vastasyntyneille, vauvoille ja leikki-ikäisille.

Tuotteen rakenne

- Sisus 902 & 905 patjoissa Eterlon HR-25 / R25085 (25 kg/m³) paloturvallinen kimmo-vahtomuovi.
- Sisus 908 patjassa E-33PS / D33145 (33 kg/m³) paloturvallinen vahtomuovi
- Päällinen polyuretaanipinnoitettu hygieniakangas, joka ei läpäise nesteitä, mutta on hengittävä. Vetoketju päädyssä.

Hyödyt

- Turvallisia ja helppohoitaisia patjoja, voidaan käyttää molemmin puolin.
- Helpottaa ja nopeuttaa hoitohenkilökunnan työtä, kun päällisen puhdistus onnistuu ilman sen irroittamista.

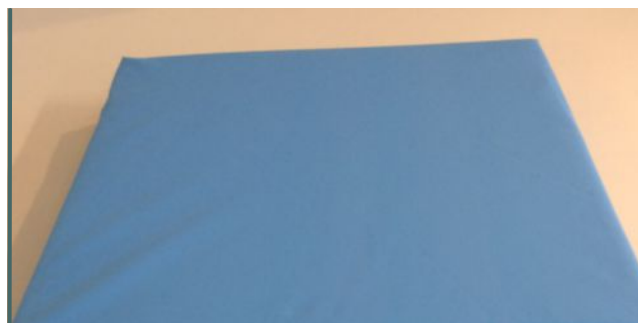

Puhdistus ja huolto

- Desinfiointi pyyhkimällä ohjeen mukaan laimennetulla klooriamiini- tai alkoholi-pohjaisella aineella, huuhtelee ja kuivaa huolellisesti. Tarvittaessa päällisen pesu 70-95°C nurinpäin, varovainen rumpukuivaus alennetussa lämpötilassa.
- Käännä patjaa säännöllisesti tasaisen kulumisen varmistamiseksi. Vaihda rikkoutunut päällinen uuteen.
- Sängyssä tulisi olla säle- tai reikäpohja.

Paloluokitus, CE & avainlippu

Syttyvyysluokka SL1, liekki- ja savuketesti IMO FTPC part 9. Tuotteella on CE-merkki sekä Suomalaisen työn liiton avainlipputunnus.

Koko

Koot 38*62*5, 60*120*8 ja 75*160*12 cm.
Pakkaus 1 kpl, 902 patja 10 kpl erissä.

