



# Modux hopfällbar vårdsäng

Spara tid, logistikkostnader och utrymme

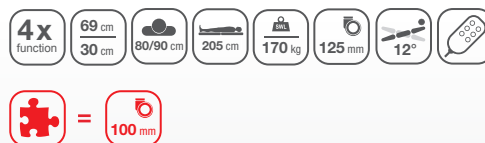

Användarklar på några minuter – utan verktyg

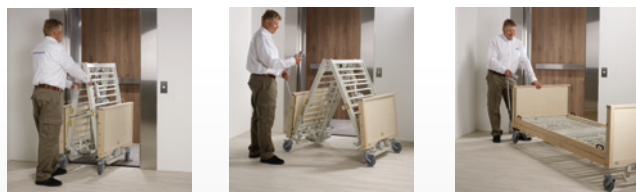

De viktigaste funktioner:

1. Litet utrymmesbehov vid lagring (transport- och lagringsläge 60 cm x 90/100 cm)
2. Fälls ihop elektroniskt genom en knapptryckning, inga verktyg behövs
3. Finns i både 80 cm och 90 cm bredd

Den patenterade vårdsängen Modux är en finsk innovation och världens första hopfällbara patientsäng. Modux fälls snabbt och enkelt ihop i transport- och förvaringsläge utan verktyg, och är därför idealisk för hemsjukvård och som exempelvis hemvårdssäng för hjälpmedelscentraler.

I transportläge har sängen måttet 60 x 90 cm. Detta innebär att en person kan transportera den i bilen, i en liten hiss och genom smala dörröppningar. Sängen öppnas i användningsläge och viks ihop igen med sin egen motor genom att trycka på knappen i ett par minuter. Inga verktyg behövs. Modux erbjuder därmed betydande livscykelbesparingar jämfört med alla andra sängalternativ – därför är sängen den mest sålda vårdsängen i Finland.

Även om det är enkelt att flytta sängen, har Modux exakt samma funktioner som andra vårdsängar och den lägsta höjden är endast 28 cm. Sängen kan även sättas i s.k. strandstolsläge.

**LOJER**® For easy care


Tekniska data och funktioner	
Dimensioner i transportläge	90/100 x 60 x 127 cm
Total bredd med räcken	90 eller 100 cm
Total längd	223 cm
Höjjusteringsområde	30 - 69 cm (125 mm stadardhjul) 28 - 67 cm (100 mm hjul)
Rekommenderad madrastorlek	78-80 or 88-90 x 205 x 9-13 cm
Total vikt:	92 kg/96 kg
Hjul:	Ø 125 mm individuellt låsbara
Belastningsförmåga (SWL):	170 kg
Elsystem	24 V
Justering av ryggdel	71°
Justering av lårdel	38°
Justering av vaddel	0-12°
Anti-Trendelenburg	12°
Övriga standardfunktioner	Handkontroll   gavlar av massivt trä samt dubbla låsbara sidor med låsknapp 2 st   integrerat fäste för dävert (huvudgavel)   integrerat fäste för droppställning (huvudgavel)
CE-märkning	Ja
Tillverkningsland	Finland

#### Fabriksinstallerade alternativ:

- Ø100 mm individuellt låsbara hjul

#### Övriga tillbehör:

- Lyftbåge
- Uppstigningsstöd
- Infusionsstav med  
enhandssnabbjustering
- Läs- och matskiva ovanpå  
sängens sidor
- Läslampa
- Vadderat räcksydd

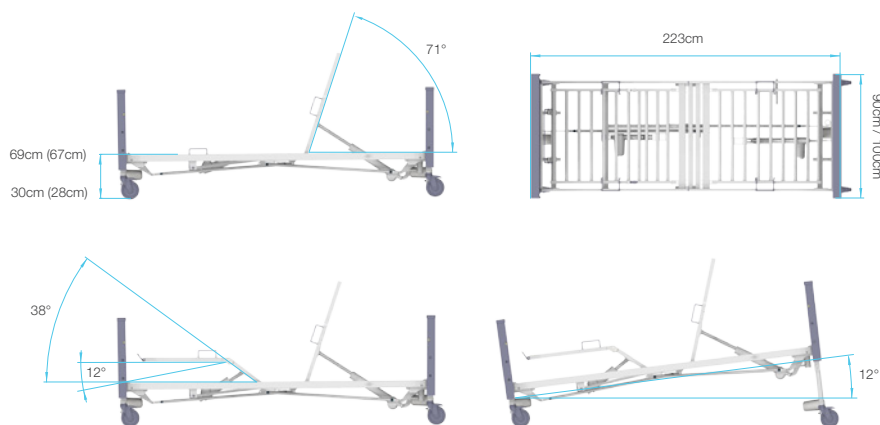

Se en video av Modux:  
<http://bit.ly/moduxvuode>



**LOJER**® For easy care