

ScanAfia X ICU sjukhussäng

Sjukhussängen för krävande användning



Egenskaper:

1. Hög Safe Working Load (SWL) 340 kg
2. Mycket lättmanövrerad tack vare stora dubbelhjul (150 mm)
3. Upp till 20° anti-Trendelenburg-justering för effektiv hjärtposition

Sängen ScanAfia X ICU är ett tryggt val för sjukhusets alla olika vårdavdelningar. Den erbjuder kvalitet och funktionalitet till ett bra pris. ScanAfia X ICU uppfyller också kraven i standarden EN 60601-2-52:2010 för sjukvårdssängar.

Sjukhussängen ScanAfia X ICU klarar laster upp till 340 kg (SWL), men är fortfarande lätt och enkel att manövrera tack vare dubbelhjulen på Ø150 mm. Man kan också få sängen med elektriskt låsbara hjul. Sängen har designats med tonvikt på ergonomi för vårdpersonalen och komfort och tillgänglighet för patienten. Den exceptionellt låga minimihöjden underlättar personalens arbete och gör det lättare för patienter att ta sig i och ur sängen. Ryggsektionens glidmekanism förbättrar också patientkomforten.

Sängen har även ett mycket stort elektriskt justeringsintervall för Trendelenburg/anti-Trendelenburg. ScanAfia X ICU-sängens standardfunktioner inkluderar också sköterskepanel, elektrisk CPR-funktion, glidmekanism för ryggsektion och batteribackup. Dessutom finns ett stort utbud av kvalitetstillbehör.

Vår mångåriga erfarenhet av att designa och tillverka sjukhus- och intensivvårdssängar är en garanti för ScanAfia X ICU-sängens långa livslängd och minimala underhållsbehov.

LOJER® For easy care


Teknisk specifikation	
Total bredd (inkl. grindar)	89,5 eller 99,5 cm
Total längd	215 cm
Höjdjustering	34–82 cm (150 mm dubbelhjul)
Rekommenderad madrassstorlek	205 x 78/88 x 13 cm
Total vikt (utan grindar)	89,5 cm bred 109 kg, 99,5 cm bred 111 kg
Hjul	Ø150 mm dubbelhjul
Maximal belastning (SWL)	340 kg
Elsystem	24V
Justering av ryggsektion	70°
Justering av låresektion	30°
Justering av vadsektion	11°
Tekniska standardfunktioner	Batteribackup avtagbara sänggavlar: vit, blå, gul eller ljusgrön kromade eller lackade grindar: standardversion och lång version sköterskepanel elektrisk CPR-funktion glidmekanism för ryggsektion manuell nödsänkning av ryggsektion fästen för stödbälten stötfångarrullar
CE-märkt	Ja
Garanti	2 år
Tillverkningsland	Finland

Fabriksmonterade tillval:

- 5:e hjul för enklare manövrering

Övriga tillbehör:

- Modell med speciallängd (utdragbar +15 cm)
- Extra höga grindar
- Dävert
- Uppresningsstöd
- Droppställning med enhands snabbjustering
- Fällbar bricka (för linne)
- Huvudgavel
- Sänggavel med monitorbord
- Hållare för urinpåse
- Läs- och matbricka, ovanpå sidogrind
- Flexibel handkontrollshållare

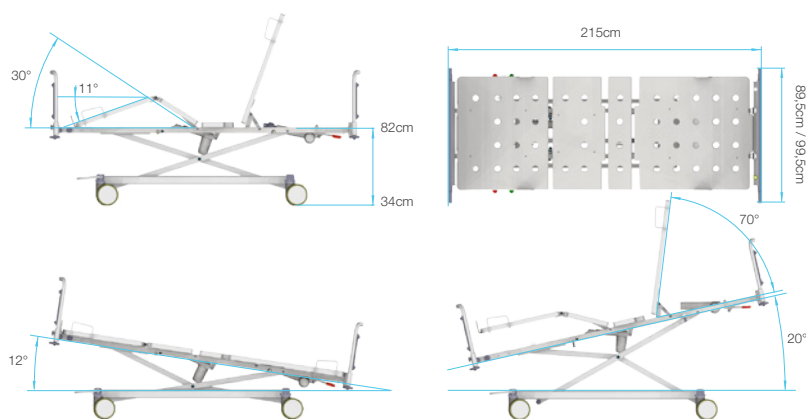

LOJER® For easy care