

# Вертикализатор Lojer Multi-Tilt

Предназначен для того, чтобы помочь пациентам встать на ноги.

Стол обеспечивает возможность электрической регулировки высоты в диапазоне 45-80 см и электрической регулировки угла наклона в диапазоне от горизонтального положения до 90 градусов. Стол спроектирован в соответствии с требованиями эргономичности, обивка ложа удовлетворяет самым высоким стандартам, края стола имеют закругленную форму. Опоры для рук могут быть закреплены на рельсах из нержавеющей стали по сторонам стола, их положение бесступенчато регулируется. В стандартной комплектации стол имеет два фиксирующих ремня, а также более широкий ремень для фиксации нижних конечностей пациента.

*” Качество конструкции и характеристики стола гарантируют безопасность пациента.”*



**Вертикализатор Lojer. Внимание!**  
На фото представлен стол с рабочим столиком (опция).

**LOJER**® For easy care

## Характеристики

Длина ложа	190 см.
Ширина ложа	67 см.
Вес	128 кг.
Диапазон наклона ложа, электропривод	0...90°
Диапазон регулировки спинной секции, пневмопривод	0...80°
Время полного наклона	27 сек.
Безопасная рабочая нагрузка	200 кг.
Универсальные рельсы для принадлежностей	X
Колеса с центральной блокировкой Ø 125 мм.	X
Обивка SKAI Fashion Platin	X
Экстренный ручной привод наклона ложа	X
Опоры для рук (2 шт.)	X
Набор фиксирующих ремней (3 шт.)	X
Рабочий столик с мягкими подлокотниками	•
Подставка для ног, отдельная	X
Упоры для рук и локтей	•
Страна происхождения	Финляндия

Стандарт= X Опция= •


## Принадлежности



Рабочий столик



Упоры для рук и локтей

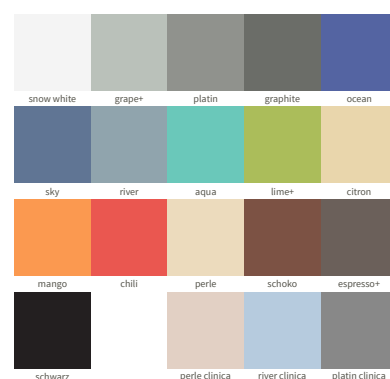

**LOJER**® For easy care

© Lojer Group 2019. Представительство в России - ООО «Лойер Медикал» 121357, Россия, Москва, ул. Вере́йская 29 стр.134 Тел. + 7 495 269 06 95 russia@lojer.com www.lojer.com

История компании началась в 1919 году когда была основано предприятие Vammalan Коопераја. Сегодня Lojer является крупнейшим производителем медицинской мебели в Скандинавии, поставляя продукцию в 115 стран мира.