

Стол Lojer Bobath

Надежные профессиональные столы для терапии Войта



Основные характеристики:

1. Невероятно высокая безопасная рабочая нагрузка (SWL) 400 кг
2. Патентованная конструкция – стол максимально устойчив и подойдет для самого интенсивного использования
3. Беспрепятственный доступ подъемника для пациента даже на самой минимальной высоте стола – 40 см

Стол Lojer Bobath разработаны специально для проведения неврологической терапии по системе Войта. Это чрезвычайно устойчивые столы даже при максимальной нагрузке благодаря патентованной конструкции. Исключительно высокая максимальная рабочая нагрузка (400 кг) позволяет физиотерапевту находиться на столе одновременно с пациентом во время процедуры.


Стол имеет высококачественную обивку, края усилены пластиковой окантовкой. Мы используем самую современную и долговечную водонепроницаемую обивку, обладающую антимикробными свойствами, ее легко чистить и дезинфицировать. Толщина обивки 30 мм, она менее эластичная, чем обычный кожзаменитель и идеально подойдет для проведения осмотров и терапевтических. Расстояние от нижнего каркаса до пола составляет 15 см, что позволяет использовать все современные подъемники, даже при расположении стола на минимальной высоте 40 см. Расположение на минимальной высоте (40 см) предоставляет возможность легко перемещения на стол пациентов в инвалидных колясках.

Доступны две модели: Bobath 1 секция (арт.4010XB) с цельным ложем и Bobath 2 секции (арт.4020XB) с регулируемой спинной секцией. Обе модели можно оснастить отверстием для лица для комфортного позиционирования пациента.

LOJER® For easy care

Технические данные и характеристики

Модель	Bobath 1 секция (арт.4010XB)	Bobath 2 секции (арт.4020XB)
Количество секций	1	2
Общая ширина	100 см / 120 см	100 см / 120 см
Общая длина	200 см	200 см
Общая длина стола с отверстием для лица (опция)	207 см	207 см
Общий вес	145 кг	145 кг
Диапазон регулировки высоты	40 - 95 см, электропривод	40 - 95 см, электропривод
Длина спинной секции	-	70 см
Диапазон регулировки спинной секции	-	0-73°
Тренделенбург /антиТренделенбург (опция)	20° / 20°	20° / 20°
Колеса	Ø 150 мм двойные, с центральной блокировкой	Ø 150 мм двойные, с центральной блокировкой
Другие стандартные характеристики	Пластиковая окантовка обивки ручной пульт управления регулировки высоты с блокировкой (нажатием клавиш в течение 3 сек)	Пластиковая окантовка обивки ручной пульт управления высоты и спинной секции с блокировкой функций (нажатием клавиш в течение 3 сек)
Обивка	Несколько типов обивки, различные цвета (информация по запросу)	Несколько типов обивки, различные цвета (информация по запросу)
Безопасная рабочая нагрузка (SWL)	400 кг	400 кг
Дорожный просвет	15 см	15 см
Электрическая система	24В	24В
Сертификат CE	Да	Да
Гарантия	2 года	2 года
Страна производства	Финляндия	Финляндия

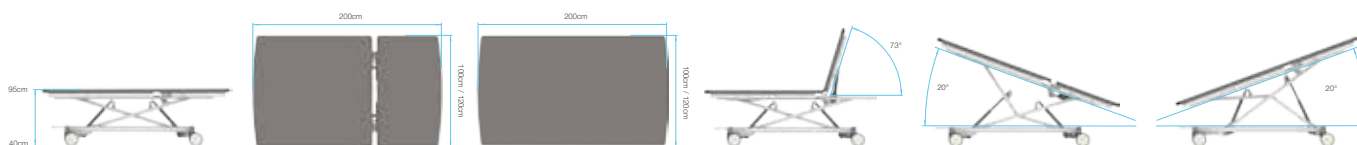

Прочие принадлежности

- Тренделенбург/антиТренделенбург (всегда включает аккумуляторную батарею)
- Ножной напольный пульт управления
- Отверстие для лица
- Аккумуляторная батарея

Аксессуары

- Рельс для принадлежностей
- Упор для пациента
- Рукоятки для перемещения
- Лампа для осмотра
- Боковые ограждения



© Lojer Group 2020. Все права защищены. ООО "Лойер Медикал". Представительство в России и странах СНГ. 121357, Россия, Москва, ул. Вере́йская 29 стр 134 Тел. + 7 495 269 06 95 russia@lojer.com | www.lojer.com

История компании началась с 1919 года. Известная ранее как Vammalan Копераја, компания занималась ремонтом техники. Сегодня Lojer Oy - крупнейший производитель медицинской мебели в Скандинавии, поставщик оборудования в 115 стран мира.