

4050X Gynekologinen yleistutkimuspöytä

Helppokäyttöinen korkean hygienian tutkimuspöytä moniin käyttötarkoituksiin



Tärkeimmät ominaisuudet:

1. Helppo säätää käyttämättä käsiä, mikä tekee henkilöstön työstä hygieenisempää ja tehokkaampaa
2. Pöytä on suunniteltu erityisesti gynekologisiin tutkimuksiin, mutta se sopii hyvin myös pieniin toimenpiteisiin ja yleistutkimukseen
3. Uusia ominaisuuksia, jotka parantavat käytettävyyttä, mukavuutta ja potilasturvallisuutta

4050X Gynekologinen tutkimuspöytä on valikoimamme monipuolisin tutkimuspöytä. Se sopii erityisen hyvin gynekologisiin tutkimuksiin, mutta sitä voidaan käyttää myös pienissä toimenpiteissä ja yleistutkimuksissa. 4050X Gynekologisessa tutkimuspöydässä on kolmiosainen makuutaso istuin-, keski- ja selkäosien säädöillä. Istuinta, keskiosaa ja korkeutta voidaan säätää pöydän edestä käyttämällä uutta gynekologista jalkaohjainta, mikä tekee terveydenhuollon henkilöstön työstä hygieenisempää ja tehokkaampaa. Lisävarusteena pöytään voidaan lisätä kaksiosainen handsfree-tanko pöydän sivuun tai käyttää käsiohjainta, joka on vakio-ominaisuus.

Uuden hygieniää parantavan gynekologisen jalkaohjaimen lisäksi tutkimuspöydän verhoilumateriaali on erittäin kestävä korkean hygienian kangasta, joka on helppo puhdistaa, se on vedenpitävää ja lisäksi sillä on erinomaiset desinfiointiominaisuudet. 4050X on varustettu säädettävillä kantapäätuilla (portaaton säätö ilman vipuja) ja gynekologisella maljalla, joka on helppo siirtää pois tieltä, kun sitä ei tarvita. 4050X:n moottorit laskevat painovoiman avulla, ja hätätilanteissa pöytä nousee automaattisesti jos jotain jää mekanismin väliin.

Saatavana on kaksi eri mallia: 4050X M -tutkimuspöydässä on pienempi määrä ominaisuuksia, kun taas 4050X F on laajemmin varusteltu – siinä on esimerkiksi muistipaikallinen käsiohjin, sähköinen istuimen säätö ja uusi gynekologinen jalkaohjin. Tarkemman erittelyn malleista voi katsoa teknisistä tiedoista ja ominaisuuksista.

Tekniset tiedot ja ominaisuudet		4050X F	4050X M
Kokonaisleveys		75 cm	75 cm
Makuutason leveys		70 cm	70 cm
Kokonaispituus		200 cm	200 cm
Kokonaispaino		120 kg	120 kg
Korkeuden säätöalue		49–97 cm	49–97 cm
Selkäosan pituus		70 cm	70 cm
Selkäosan säätö		0–73°, sähköinen	0–73°, sähköinen
Keskiosan pituus		82 cm	82 cm
Keskiosan säätö		0–73°, sähköinen	0–73°, kaasujousi
Istuinosan pituus		44 cm	44 cm
Istuinosan säätö		0 - 25°, sähköinen	Ei säädettävissä
Sähköinen Trendelenburg / anti-Trendelenburg (optio)		20° / -10°	20° / -10°
Pyörät		Ø125 mm yksittäislukittavat	Ø125 mm yksittäislukittavat
Muut vakio-ominaisuudet		Käsiohjain muistipaikalla ja pöydän eri osien samanaikaisella liikkumisella gynekologinen jalkaohjain korkeuden ja istuin- sekä keskiosan säätämiseen portaattomasti säädettävät kantapäätuet gynemalja lisävarustekiskot istuinosassa paperirullateline ja -leikkuri turvaominaisuus: istuin- ja keskiosan välinen kulma min. 105° turvaominaisuus: automaattinen pöydän nousu hätätilanteissa turvaominaisuus: pöydän lukitus gynekologisella jalkaohjaimella painamalla kahta poljinta 3 sek tai käsiohjaimella Adapteri nesteenantotelineelle (4 eri asennuspaikkaa)	Käsiohjain, jossa myös pöydän lukitusmahdollisuus portaattomasti säädettävät kantapäätuet gynemalja lisävarustekiskot istuinosassa paperirullateline ja -leikkuri turvallisuusominaisuus: automaattinen pöydän nousu hätätilanteissa Adapteri nesteenantotelineelle (4 eri asennuspaikkaa)
Verhoilu		Useita materiaali- ja väri vaihtoehtoja, kysy lisätietoa	Useita materiaali- ja väri vaihtoehtoja, kysy lisätietoa
Kuormitettavuus (SWL)		210 kg	210 kg
Sähköjärjestelmä		24V	24V
CE -merkintä		Kyllä	Kyllä
Valmistusmaa		Suomi	Suomi

Tehdasasenteiset optiot


- Trendelenburg / anti-Trendelenburg sisältäen akun
- Keskuslukittavat pyörät Ø125 tai Ø150 mm
- Keskuslukittavat sähköä johtavat kaksoispyörät Ø 150 mm
- Kaksiosainen handsfree-tanko (korkeuden ja selkäosan säätö)
- Jalkaohjain (korkeuden ja selkäosan säätö)
- Akku

Lisävarusteet

- Pohjetukipari, valkoinen muovi (pieniin toimenpiteisiin). Sisältää pikalukot ja pehmustetut kiinnityshihnat.
- Pohjetukipari, musta valettu pehmuste (pidempikestoisiin toimenpiteisiin). Sisältää rotaatiolukot ja pehmustetut kiinnityshihnat.
- Nesteenantoteline: suora tai taivutettu
- Lisävarustekisko
- Lisävarustekisko, messinki
- Pikalukko Ø 20 mm
- Sivukaide
- Anestesiakaari
- Työntökahvat
- Tutkimusvalaisin (kiinnitys lisävarustekiskoon tai runkoon)
- Niskatyyny
- Käsituki näytteenottoon



4050X F malli

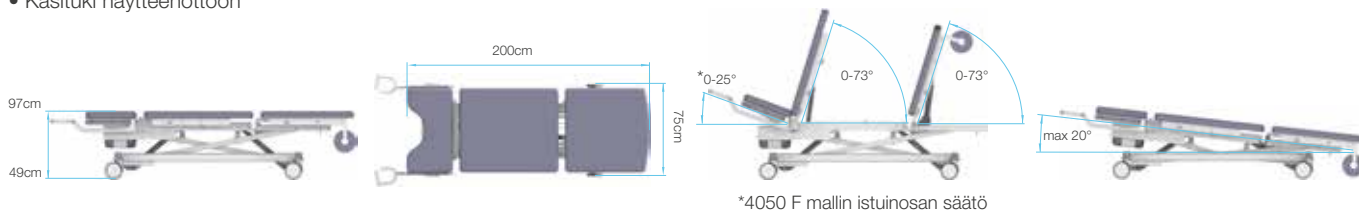

*4050 F mallin istuinosan säätö

