

4050X Gynekologi- och undersökningsbänk

Hygienisk och lättanvänd undersökningsbänk för flera ändamål



Viktigaste egenskaperna:

1. Enkel att justera och helt handsfree, vilket gör vårdpersonalens arbete mer hygieniskt och effektivt
2. Utformad speciellt för gynekologiska undersökningar, men den lämpar sig även för mindre ingrepp och allmänna undersökningar
3. Nya funktioner som förbättrar användbarhet, komfort och patientsäkerhet

4050X är den mest mångsidiga undersökningsbänken i vårt sortiment. Den är särskilt väl lämpad för gynekologiska undersökningar, men den kan även användas vid mindre ingrepp och allmänna undersökningar. 4050X har en tredelad liggbänk med justeringar för sittdel, mittdel och ryggdel. Sättesdel, mittdel och höjd kan justeras från framsidan av bänken med hjälp av det nya gynekologiska fotreglaget, vilket gör vårdpersonalens arbete mer hygieniskt och effektivt. Man kan som alternativ också lägga till en handsfree justeringsspak i två delar på sidan av bänken eller använda handkontrollen som är en standardfunktion.

Förutom det nya gynekologiska fotreglaget som förbättrar hygien, är klädselns material extremt hållbar, lätt att rengöra, vattentät och har utmärkta desinfektionsegenskaper. 4050X är som standard utrustad med justerbara hälstöd (steglösa utan spakar) och en gynekologisk skål som är enkel att flytta när den inte behövs. 4050X motorer sänker bänken med hjälp av gravitation. I nödsituationer höjs den automatiskt om något fastnat mellan mekanismen.

Det finns två modeller av 4050X: 4050X M har ett mindre antal funktioner, medan 4050X F är mer omfattande – den har t. ex. en handkontroll med minnesplats, elektrisk sättesjustering och det nya gynekologiska fotreglaget (se tekniska data och funktioner för mer information).

Tekniska data och funktioner	4050X F	4050X M
Total bredd	75 cm	75 cm
Liggdels bredd	70 cm	70 cm
Total längd	200 cm	200 cm
Total vikt	120 kg	120 kg
Höjjustering	49 - 97 cm	49 - 97 cm
Ryggdels längd	70 cm	70 cm
Justering av ryggdel	0-73°, elektrisk	0-73°, elektrisk
Mittdelens längd	82 cm	82 cm
Justering av mittdel	0-73°, elektrisk	0-73°, gasfjäder
Sittdelens längd	44 cm	44 cm
Justering av sittdel	0-25°, elektrisk	Ej justerbar
Elektrisk Trendelenburg/anti-Trendelenburg (tillval)	20° / -10°	20° / -10°
Hjul	Ø 125 mm låsbara hjul	Ø 125 mm låsbara hjul
Övriga standardfunktioner	Handkontroll med minnesplats och samtidig förflyttning av olika delar gynekologiskt fotreglage för justering av höjd, sitt- och mittdel steglöst justerbara hälstöd gynekologisk skål gynekologiska skåttillbehörsskenor i sittdelen pappersrullhållare och -skärare säkerhetsegenskap: minst 105° vinkel mellan sitt- och mittdelen, automatisk bänklöft i nödsituationer, låsfunktion genom att trycka ner två pedaler på det gynekologiska fotreglaget eller på knapparna på handkontrollen i 3 sekunder adapter för infusionsstav montering (4 möjliga positioner)	Handkontroll med säkerhetslåsfunktion genom att trycka på två knappar i 3 sekunder steglöst justerbara hälstöd gynekologisk skål tillbehörsskenor i sittdelen pappersrullhållare och -skärare säkerhetsegenskap: automatisk bänklöft i nödsituationer adapter för infusionsstav montering (4 möjliga positioner)
Klädsel	Flera material- och färgalternativ, mer information på begäran	Flera material- och färgalternativ, mer information på begäran
Säker arbetsbelastning (SWL)	210 kg	210 kg
Elsystem	24V	24V
CE-märkning	Ja	Ja
Garanti	2 år	2 år
Tillverkningsland	Finland	Finland

Fabriksinstallerade alternativ


- Trendelenburg/anti-Trendelenburg med batteri
- Centrallåsbara hjul Ø 125 eller Ø 150 mm
- Centrallåsbara elektriskt ledande dubbla hjul Ø 150 mm
- Handsfree justeringsspak i två delar för justering av höjd och ryggdel
- Fotpedal för justering av höjd och ryggdel
- Batteridrivnen

Övriga tillbehör

- Vadstödpar, vit plast (för mindre ingrepp). Inkluderar snabbblås och fästremmar.
- Vadstödpar, svart gjuten stoppning (för längre ingrepp). Inkluderar rotationslås och fästremmar.
- Infusionsstativ, rakt eller böjt
- Tillbehörsskena
- Tillbehörsskena, mässing
- Snabbblås Ø 20 mm
- Sidoskena
- Anestesiram
- Tryckhandtag
- Undersökningslampa (fastsättning på tillbehörsskenan eller ramen)
- Nackkudde
- Armstöd för provtagning



Modell: 4050X F

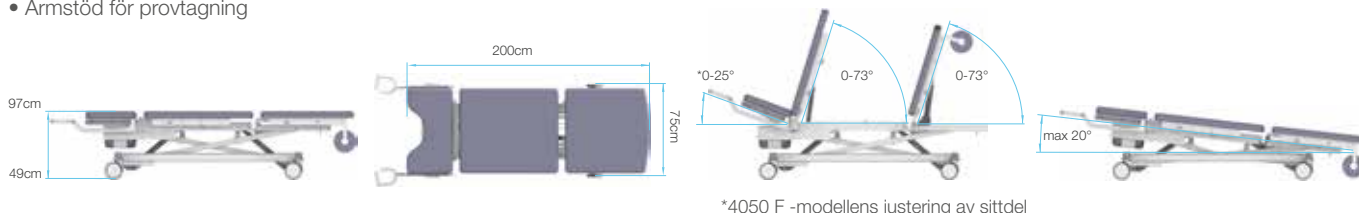

*4050 F -modellens justering av sittdel

