


Стол для осмотра Carpe

Мощный современный смотровой стол



Изделие на фото представлено с дополнительными опциями

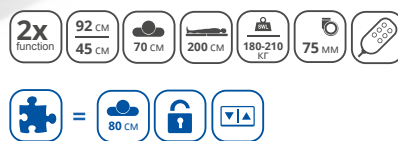

Основные характеристики:

1. Современный и уникальный дизайн
2. Высокая устойчивость
3. Большое количество опций и аксессуаров


Стол для осмотра Lojer Carpe представляет собой уникальный класс, когда речь идет о дизайне и функциональности.

Дизайн стола украсит интерьер медицинских кабинетов. Столы для осмотра часто устанавливаются в смотровых кабинетах, где их редко перемещают. Столы Carpe EX можно оснастить колесами 75 мм., которые улучшают подвижность, например, для проведения уборки.

Регулировка высоты обеспечивает наилучшую эргономику для специалистов и комфорт для пациентов. Самая низкая высота 45 см удобна для пожилых пациентов и пациентов, пользующихся инвалидным креслом. Столы для осмотра Carpe EX – имеют ряд аксессуаров, от боковых опор до анестезиологической дуги и опоры для руки. Опциональное управление педалью- рамой на 360° обеспечивает удобство при регулировке высоты, что повышает качество работы.

Данная модель выпускается в вариантах Carpe EX1 с односекционным ложем., Carpe EX2 с двухсекционным ложем.

Технические характеристики	EX1	EX2	EX2H
Общая ширина	70 см (80 см опция)	70 см (80 см опция)	70 см (80 см опция)
Ширина ложа	70 см (80 см опция)	70 см (80 см опция)	70 см (80 см опция)
Общая длина	200 см	200 см	200 см
Длина ложа	200 см	200 см	200 см
Вес	100 кг	100 кг	95 кг
Регулировка высоты	45 – 92 см, электропривод	45 – 92 см, электропривод	49 – 90 см, гидропривод
Длина спинной секции	-	70 см	70 см
Регулировка спинной секции	-	0-73°	0-73°
Колеса с центральной блокировкой (опция)	ø 75 мм	ø 75 мм	ø 75 мм
Другие стандартные характеристики	Электропривод высоты (ручной пульт) Прорезиненные ножки	Электропривод высоты и спинной секции (ручной пульт) Прорезиненные ножки	Пневмопривод спинной секции Гидропривод высоты Прорезиненные ножки
Обивка	Несколько цветов и вариантов материалов, более подробную информацию смотрите в карточке обивки или на сайте lojer.com		
Безопасная рабочая нагрузка	180 кг	210 кг	180 кг
Маркировка CE	Да	Да	Да
Гарантия	2 года	2 года	2 года
Страна происхождения	Финляндия	Финляндия	Финляндия

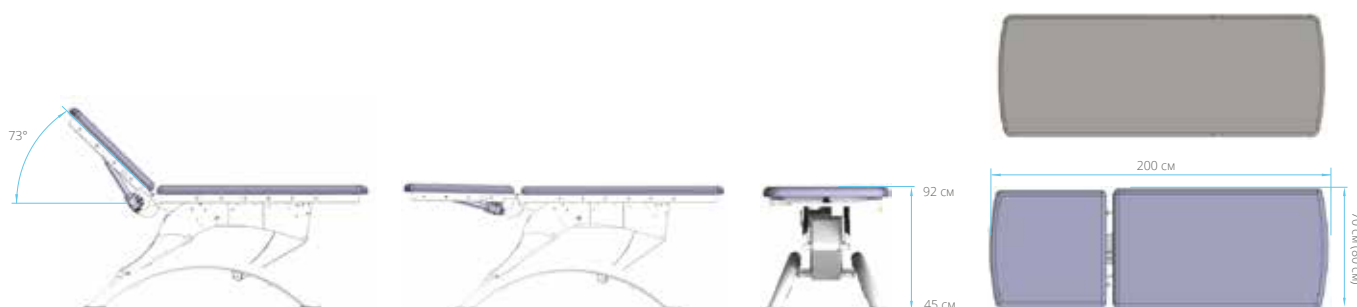

Опции, устанавливаемые на заводе:

- Ножной напольный пульт для регулировки высоты для EX1
- Ножной напольный пульт для регулировки высоты и спинной секции для EX2
- Регулировка спинной секции пневмоприводом для EX2
- Педаль – рама регулировки высоты EX1 и EX2
- Защитный выключатель
- Увеличение ширина ложа до 80 см
- Колеса с центральной блокировкой, ø 75 мм

Другие принадлежности:

- Инфузионная стойка (прямая или изогнутая)
- Анестезиологическая дуга
- Адаптер для инфузионной стойки и анестезиологической дуги
- Рельс для принадлежностей (до 6 шт.)
- Смотровая лампа (крепление через адаптер Lojer)
- Смотровая лампа (крепление через зажим на рельсах)
- Подушка
- Держатель бумаги
- Опора для руки (подлокотник)
- Боковые ограждения

